

STILLE Untertisch-Strahlenschutz

imagiQ2 und Medstone C-Bogen Tische – Zubehör



Surgical perfection. For life.

Da die Häufigkeit der bildgeführten/ interventionellen Verfahren weiter wächst, erfordert dies auch Technologien zur Dosisreduzierung und zum Strahlenschutz.



STILLE imagiQ2 chirurgischer Bildgebungstisch



Röntgenschutzset (6 einzelne Lamellen); erhältlich in grau (535-1770) und blau (535-1771)



Röntgenschutzvorhang (5 miteinander verbundene Lamellen); erhältlich in den Farben grau (535-1772) und blau (535-1773)

Vermeidung unnötiger Strahlung

Die Strahlenbelastung ist nach wie vor ein großes Anliegen des klinischen Personals und der Patientengemeinschaft. Basierend auf den internationalen Basissicherheitsbestimmungen (BSS) gibt es heute Möglichkeiten, die schädlichen Risiken der Strahlenbelastung einzuschränken. Sogar eine geringe Strahlendosis erhöht das Krebsrisiko geringfügig, so dass nach den Prinzipien der Strahlenschutzoptimierung die Strahlenexposition so gering wie möglich gehalten werden muss.

STILLE Unterkörperstrahlenschutz

Der STILLE Strahlenschutz ist ein Streustrahlenschutz, der vollständig auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnitten ist. Auf die Kundenwünsche abgestimmter Strahlenschutz ist für verschiedene Zwecke erhältlich und kann leicht – in der Regel mit Klettband- befestigt werden. Der Blei-Kautschuk (0,5Pb) im Inneren der Lamellen verhindert, dass Streustrahlung in die untere Körperhälfte und Beine des Krankenhauspersonals gelangt, die oft ungeschützt vor Strahlung bleiben. Der Strahlenschutz ist einfach zu bedienen. Er besteht aus hochfrequenzgeschweißtem, verstärkten PVC-Kunststoff, einem Material, das dem Waschen mit Wasser und der Desinfektion mit Alkohol standhält. Ein Röntgenschutzset oder ein Röntgenschutzvorhang deckt nur eine Tischseite ab. Um beide Tischseiten abzudecken, sind mind. 2 Einheiten notwendig.

STILLE Röntgenschutzsets

535-1770 (grau) und 535-1771 (blau)

Die STILLE Schutzsets sind für den oberen Teil der Tischplatte konzipiert. Sie können mit oder ohne Seitenschiene eingesetzt werden, da sie mit Klettband an der Tischplatte befestigt werden. Ein Set besteht aus 2 speziellen Lamellen mit einem Ausschnitt für die Seitenschiene sowie 4 geraden Lamellen ohne Ausschnitt. Die Lamelle mit Ausschnitt wiegt etwa 1,05kg und die Lamelle ohne Ausschnitt ca. 0,85kg.

STILLE Röntgenschutzvorhänge

535-1772 (grau) und 535-1773 (blau)


Die STILLE Schutzvorhänge werden mit Klettbandschlaufen an den Seitenschiene des Tisches oder mit selbstklebenden Klettbandstreifen direkt auf der Tischplatte befestigt. Jeder Schutzvorhang besteht aus 5 zusammenhängenden Schutzlamellen, die auch während einer Untersuchung schnell an den gewünschten Stellen des Tisches befestigt werden können. Zwei Vorhänge können ebenfalls überlappend am Tisch befestigt werden. Die Vorhänge können schnell und einfach mit den Schutzsets oder einzelnen Lamellen kombiniert werden. Ein Schutzvorhang wiegt ca. 3,65kg und ist ca. 65cm breit.

STILLE Röntgenschutzlamellen

535-1774 (grau) und 535-1775 (blau)

Die STILLE Schutzlamellen ohne Ausschnitt werden mit selbstklebenden Klettbandstreifen auf der Tischplatte befestigt und können in Kombination mit den Schutzsets und Schutzvorhängen verwendet werden – vorzugsweise an der kurzen Seite der Tischplatte. Das Lamellengewicht beträgt etwa 0,85kg/ Stück. Die Abmessungen jeder Lamelle betragen ca. 16x84cm.



Abmessungen der STILLE Röntgenschutzvorhänge 535-1772 (grau) und 535-1773 (blau)

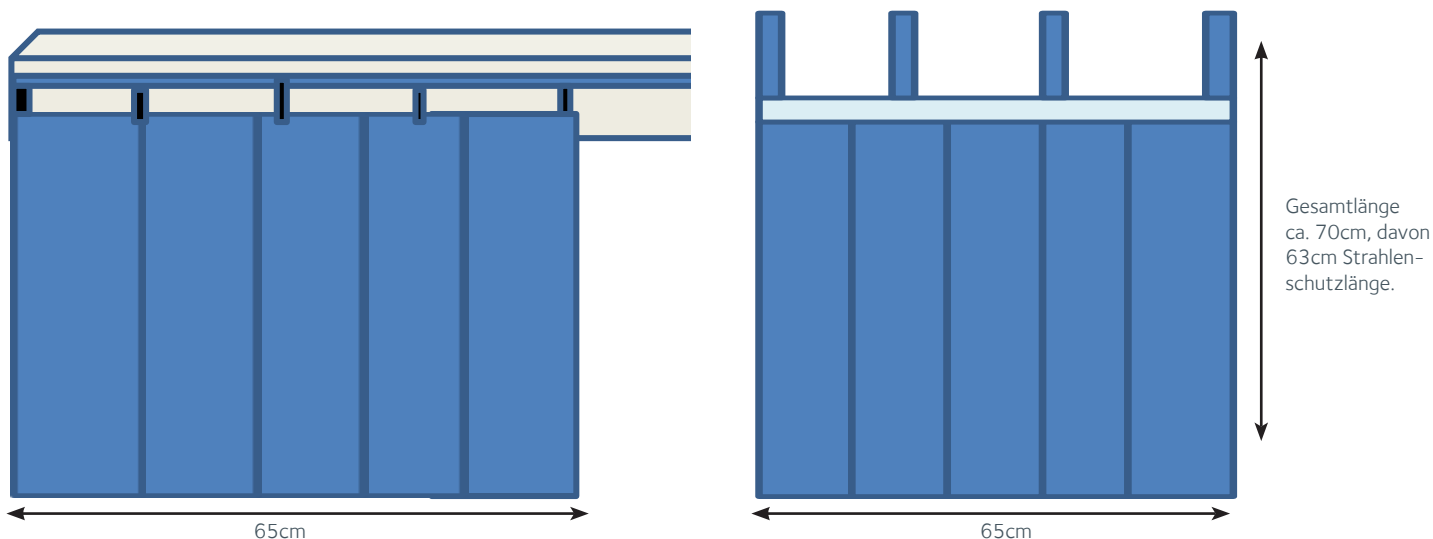

Abmessungen der STILLE Röntgenschutzsets 535-1770 (grau) und 535-1771 (blau)

Röntgenschutzlamelle ohne Ausschnitt 535-1774 (grau) und 535-1775 (blau); die Sets 535-1770 und 535-1771 enthalten 4 dieser Lamellen.

Röntgenschutzlamelle mit Ausschnitt; die Sets 535-1770 und 535-1771 enthalten 2 dieser Lamellen. Diese Lamellen sind nur als Teil der Röntgensets erhältlich.

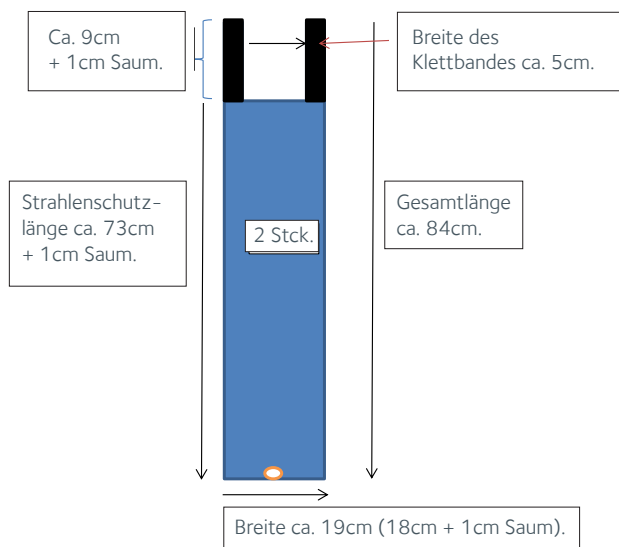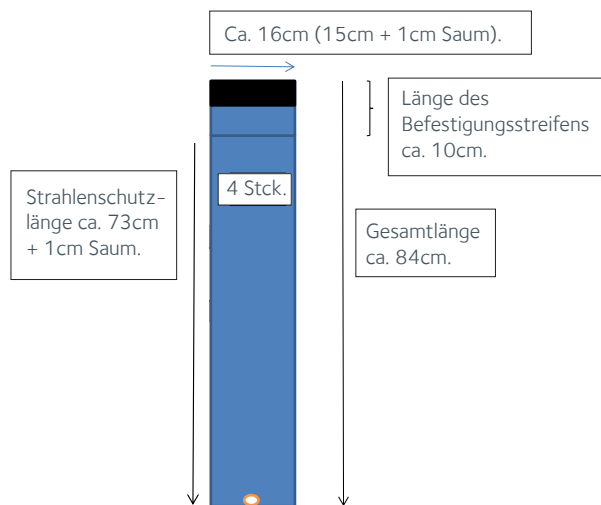

Produktspezifikationen	Beschreibung
Farbauswahl	Blau, Grau
Schutzstufe	Pb 0.5 Blei-Vinyl
Bezugstoff	Polystergewebe-beschichtet mit PVC
Naht	Hochfrequenz gesäumt

Strahlenschutzmodelle	Artikelnummer
Röntgenschutzset grau	535-1770
Röntgenschutzset blau	535-1771
Röntgenschutzvorhang grau	535-1772
Röntgenschutzvorhang blau	535-1773
Röntgenschutzlamelle grau	535-1774
Röntgenschutzlamelle blau	535-1775



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Schweden
Telefon: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
info@stille.se

STILLE Surgical Inc.

915 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
USA
Telefon: 1.800.665.1614

www.stille.se/imagiQ