




STILLE Medstone

Mesas de Imagen Quirúrgica

Mayor versatilidad

para una amplia gama de procedimientos de intervención

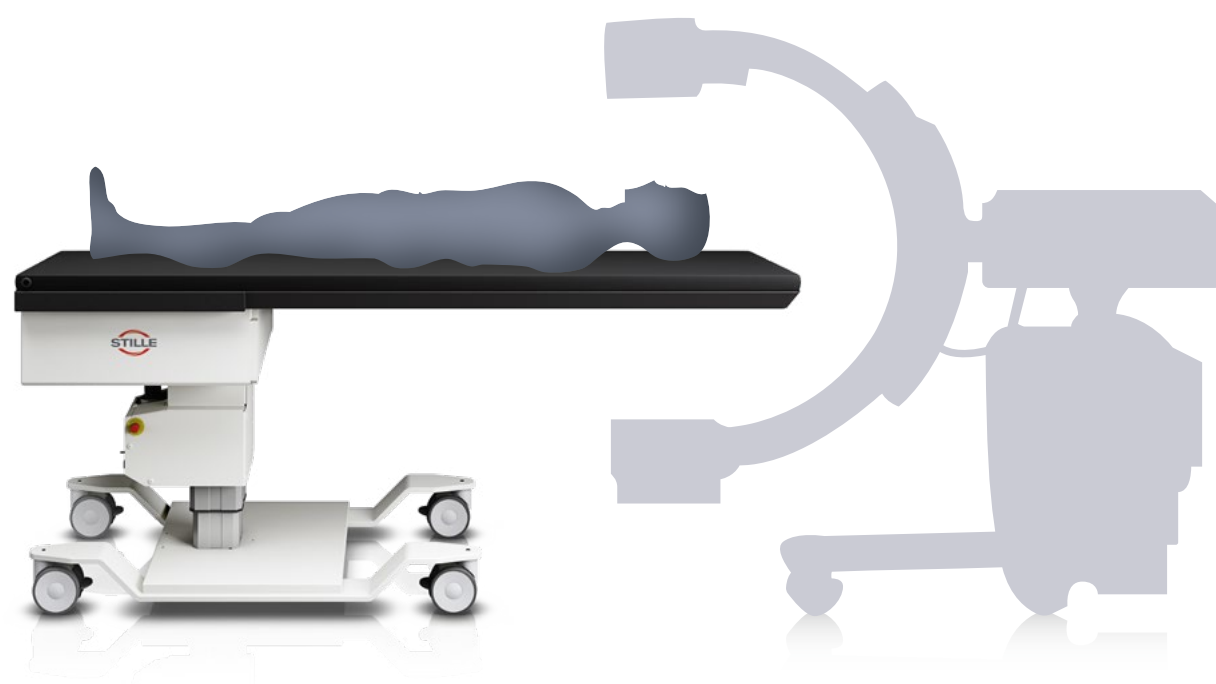

POSICIÓN
SUPINA



POSICIÓN
PRONO



POSICIÓN
LATERAL



POSICIÓN
ESPINAL



POSICIÓN
TREDELENBURG



POSICIÓN
TREDELENBURG
INVERSA



- ✓ Calidad asequible
- ✓ Intuitiva y fácil de usar
- ✓ Áreas de imagenología grandes

La amplia selección de modelos Medstone admite una amplia gama de intervenciones quirúrgicas. La calidad y la fiabilidad de nuestras mesas de imagenología quirúrgicas para brazo en C contribuyen a mejorar la eficiencia durante los procedimientos a un precio económico.

Amplia gama de movimientos para un posicionamiento preciso del paciente. Ya sea motorizada o a través de la función de flotación libre – se garantiza el posicionamiento óptimo del paciente de forma intuitiva y rápida.

Hasta cinco movimientos motorizados disponibles



Ajuste de la altura

Para facilitar la transición y movilidad del paciente, así como el ajuste a la altura del médico. Con una elevación de hasta 108 cm, la mesa permite colocar al paciente cerca del receptor de la imagen, lo que aumenta la calidad de la imagen.



Trendelenburg

En situaciones en las que es necesario subir o bajar la cabeza del paciente.



Recorrido longitudinal y lateral

El movimiento motorizado permite un preciso posicionamiento longitudinal y lateral para imágenes de rayos X, ya que el brazo en C no se tiene que mover para capturar la anatomía de interés.



Inclinación lateral

Minimiza la necesidad de recolocar el brazo en C durante los procedimientos.



Tecnología Free Float con Medstone3 CV

Permite una libertad total de movimientos horizontal y diagonalmente para una mayor fiabilidad y control al utilizar la mesa. Esto permite una excelente precisión y una reducción del tiempo de operación. Ideal para aplicaciones como seguimiento de medios de contraste durante procedimientos endovasculares (persecución de bolo).

Más de 1000 unidades vendidas en todo el mundo

Las mesas Medstone de STILLE son fiables en **múltiples aplicaciones**. Los clientes aprecian la operación intuitiva y su facilidad de uso. En combinación con el tablero de la mesa de fibra de carbono, las mesas Medstone contribuyen a una alta calidad de imagen.



STILLE Medstone PM

- ▶ ofrece hasta cinco movimientos motorizados
- ▶ disponibles con diferentes tableros: contorneadas con un recorte facial para el posicionamiento prono del paciente y rectangular sin recorte facial para la colocación supina del paciente
- ▶ para cada demanda: Medstone2 PM es el modelo básico, mientras que Medstone5 PM es ideal para tratamientos complejos
- ▶ capacidad de peso de 227 kg

Configuración estándar
colchón, tres correas de paciente, control manual



- Contorneado::
- Rectangular:
- ✓ Ortopedia

✓ Gestión del dolor
- ✓ Electrofisiología

✓ Vascular periférico

✓ Veterinaria

✓ Multidisciplinar

	Medstone2 PM	Medstone3 PM	Medstone3 PM Rectangular	Medstone4 PM	Medstone5 PM
Número de pieza	500-1011	500-1005	500-1043	500-1004	500-1001
Tipo del tablero	contorneado ⁽¹⁾	contorneado ⁽¹⁾	rectangular	contorneado ⁽¹⁾	contorneado ⁽¹⁾
Medidas del tablero (cm)	56 x 208	56 x 208	56 x 208	56 x 208	56 x 208
Longitud de imagenología de 360° (cm)	147	147	147	147	147
Riel lateral fijo (cm)	no	no	no	no	30,5
Cubiertas para el control de infecciones	no	no	no	no	sí
Ajuste de la altura ⁽²⁾ (cm)	✓ 65,3 – 100,6	✓ 62,6 – 97,6	✓ 62,6 – 97,6	✓ 73,0 – 108,0	✓ 65,5 – 101,0
Trendelenburg ⁽³⁾ (± 15°)	✗	✓	✓	✓	✓
Inclinación lateral ⁽³⁾ (± 15°)	✓	✗	✗	✓	✓
Recorrido longitudinal ⁽²⁾ (40 cm)	✗	✓	✓	✓	✓
Recorrido lateral ⁽²⁾ (15 cm)	✗	✗	✗	✗	✓

⁽¹⁾ con recorte facial

⁽²⁾ tolerancia de ± 1,25 cm

⁽³⁾ tolerancia de ± 2.0°

STILLE Medstone ERCP

- ▶ ofrece hasta cinco movimientos motorizados
- ▶ ideal para los procedimientos con pacientes en posición lateral y/o para pacientes más grandes
- ▶ incluye un tablero extra ancho para facilitar la fluoroscopia abdominal y los procedimientos endoscópicos
- ▶ capacidad de peso de 227 kg

Configuración estándar
colchón, tres correas de paciente, control manual



- ✓ Abdominal
- ✓ Gastroenterología
- ✓ Broncoscopia
- ✓ Ortopedia
- ✓ Procedimientos fluoroscópicos

	Medstone2 ERCP	Medstone3 ERCP	Medstone3 ERCP	Medstone5 ERCP
Número de pieza	500-1041	500-1007	500-1044	500-1031
Tipo del tablero	amplia	amplia	amplia	amplia
Medidas del tablero (cm)	66 x 208	66 x 208	66 x 208	66 x 208
Longitud de imagenología de 360° (cm)	147	147	147	147
Riel lateral fijo (cm)	no	no	no	no
Cubiertas para el control de infecciones	no	no	no	sí
Ajuste de la altura ⁽¹⁾ (cm)	✓ 66,5 – 101,9	✓ 63,5 – 98.8	✓ 63,9 – 98,9	✓ 67,0 – 102,0
Trendelenburg ⁽²⁾ (± 15°)	✗	✗	✓	✓
Inclinación lateral ⁽²⁾ (± 15°)	✓	✗	✗	✓
Recorrido longitudinal ⁽¹⁾ (40 cm)	✗	✓	✓	✓
Recorrido lateral ⁽¹⁾ (15 cm)	✗	✓	✗	✓

⁽¹⁾ tolerancia de ± 1,25 cm

⁽²⁾ tolerancia de ± 2.0°

STILLE Medstone CV

- ▶ la mesa Medstone3 CV de STILLE con tablero flotante libre para la imagenología de la cabeza a los pies con precisión, velocidad y libertad de movimientos completa
- ▶ la Medstone3 CV de STILLE tiene una unidad de control flotante con liberación de bloqueo magnético, así como controles de pie y manual
- ▶ con la mesa Medstone5 CV de STILLE, la serie ofrece cinco movimientos motorizados, incluyendo el Trendelenburg
- ▶ capacidad de peso de 227 kg

Configuración estándar
colchón, tres correas de paciente, control manual; Medstone3 CV también incluye un pedal de control y un control de paneo



- ✓ Cardiovascular
- ✓ Radiología intervencionista
- ✓ Endovascular
- ✓ Procedimientos fluoroscópicos
- ✓ Vascular
- ✓ Electrofisiología (marcapasos, ...)

	Medstone3 CV	Medstone5 CV
Número de pieza	500-1025	500-1002
Tipo del tablero	rectangular	rectangular
Medidas del tablero (cm)	61 x 208	56 x 208
Longitud de radiotransparencia 360° (cm)	76 ⁽¹⁾	147
Riel lateral fijo (cm)	93,0	30,5
Cubiertas para el control de infecciones	no	sí
Ajuste de la altura ⁽²⁾ (cm)	✓ 67,6 – 107,6	✓ 65,5 – 101,0
Trendelenburg ⁽³⁾ (± 15°)	✗	✓
Inclinación lateral ⁽³⁾ (± 15°)	✗	✓
Recorrido longitudinal ⁽²⁾ (cm)	✓ 91,0	✓ 40,0
Recorrido lateral ⁽²⁾ (cm)	✓ 20,0	✓ 15,0

⁽¹⁾ longitud de imagenología total : 167 cm
⁽²⁾ tolerancia de ± 1,25 cm
⁽³⁾ tolerancia de ± 2.0°

Accesorios recomendados. Aquí hay una selección de la amplia gama de accesorios disponibles. Lo siguiente es solo una selección de las amplias ofertas.

Accesorios	Type	Part number	Compatible con
Kit de protección de rayos X	gris azul	535-1770 535-1771	<i>todos los modelos</i> <i>todos los modelos</i>
Protección de rayos X loop	gris azul	535-1772 535-1773	<i>todos los modelos</i> <i>todos los modelos</i>
Pedal de control	5 movimientos 4 movimientos 3 movimientos 3 movimientos	505-1109 505-1108 505-1139 505-1138	<i>Medstone5 PM / CV / ERCP</i> <i>Medstone4 PM</i> <i>Medstone3 ERCP</i> <i>(sólo 500-1007)</i> <i>Medstone3 PM / ERCP</i> <i>(sólo 500-1005 y -1044)</i>
Riel lateral extraíble	2 x 80,5 cm, simétrico 2 x 80,5 cm, simétrico 2 x 112,5 cm, asimétrico 2 x 112,5 cm, asimétrico	505-1179 505-1181 505-1175 505-1177	<i>Medstone2, 3 y 4 PM</i> <i>(sólo 500-1004), Medstone3 CV</i> <i>Medstone2 y 3 ERCP</i> <i>(sólo 500-1040 y -1044)</i> <i>Medstone PM, Medstone5 CV</i> <i>Medstone ERCP</i>
Brazo auxiliar	brazo auxiliar a presión brazo auxiliar para fistula brazo auxiliar ajustable	505-1111 505-1118 514-50-3SR025	<i>todos los modelos</i> <i>todos los modelos</i> <i>excl. Medstone ERCP</i> <i>todos los modelos</i>
Rieles laterales	plegables, par	514-100530	<i>Medstone ERCP</i>
Bandejas de catéter	68,3 cm	505-1131	<i>Medstone3 CV</i>
Paquete de accesorios	vascular, incl. 505-1179, 535-1772, 505-1118 CPRE incl. 505-1181, 514-50-3SR025, 514-100530 CPRE incl. 505-1181, 514-100530	505-1188 505-1189 505-1190	<i>Medstone3 CV</i> <i>Medstone ERCP</i> <i>Medstone ERCP</i>

Consulte el folleto de accesorios para obtener una lista completa.

STILLE – Surgical perfection. For life.

STILLE es una de las empresas de dispositivos médicos más antiguas del mundo. En STILLE, desarrollamos, fabricamos y vendemos instrumentos quirúrgicos de alta calidad y mesas de imagen quirúrgica a médicos de todo el mundo, y lo hacemos desde hace 180 años.

La oferta de STILLE consiste en una marca fuerte y productos conocidos por su calidad superior. Gestionamos nuestra actividad en dos áreas de actividad distintas – Instrumentos Quirúrgicos y Mesas de Imagen Quirúrgica.

Instrumentos Quirúrgicos

En nuestra área de actividades Instrumentos Quirúrgicos, tenemos una oferta completa de instrumentación artesanal forjada para todos los sectores de la cirugía abierta, con especial atención a la cirugía cardiovascular y a la cirugía plástica reconstructiva y estética.

Nuestros instrumentos quirúrgicos se caracterizan

por un diseño delicado, resistencia a la vanguardia y una sensación táctil única, que ha hecho de STILLE un proveedor bien conocido y muy respetado por los cirujanos de todo el mundo.

Mesas de Imagen Quirúrgica

En nuestro área de negocios Mesas de imagen quirúrgicas ofrecemos mesas especializadas para procedimientos mínimamente invasivos, con precios, seguridad y características optimizadas tanto para pacientes internos como externos. Las mesas de imagenología quirúrgica móviles Medstone de STILLE contribuyen a mejorar la eficiencia en el quirófano mientras representan una solución asequible con calidad y fiabilidad.

Más información en www.stille.se

STILLE AB

Ekbacken 11

644 30 Torshälla

Suecia

+46 8 588 580 00

sales@stille.se

www.stille.se



Surgical perfection. For life.

Estos productos pueden no estar disponibles en todas las regiones. Póngase en contacto con su representante de STILLE para obtener más información sobre la disponibilidad en el mercado.

Este documento describe correctamente estos dispositivos en el momento de la impresión del documento. Consulte siempre el manual del usuario para cualquier corrección del producto.

Este documento ha sido traducido del inglés. En caso de inconsistencia, prevalecerá la versión en inglés. Las imágenes del producto que se muestran son solo para fines ilustrativos y pueden no ser una representación exacta del producto.