



Surgical perfection. For life.



STILLE imagiQ3™ Legacy

Da un paso más hacia
la perfección en imagenología.

Elevando la perfección con máxima visualización y eficiencia en quirófano

Construido sobre décadas de experiencia con miles de unidades imagiQ™ en todo el mundo, el imagiQ3™ Legacy incorpora nuevas tecnologías mientras mantiene la reconocida alta radiolucencia de imagiQ™ y el legendario True Free Float™. Un paso adelante, el imagiQ3™ Legacy lleva los límites de la perfección más allá y es una obra maestra en salas de operaciones y laboratorios de cateterismo.

Utilización clínica versátil*

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ✓ Vascular | ✓ Neumología | ✓ Gastroenterología / ERCP |
| ✓ Electrofisiología
/ Arritmología | ✓ Columna vertebral | ✓ Veterinaria** |
| | ✓ Terapia del dolor | |

* Dentro del uso previsto

** Solo EE. UU.



Calidad y diseño sueco

Las mesas STILLE imagiQ™ son las mejores mesas móviles de imagenología que han sido imitadas, pero nunca igualadas. Diseñadas meticulosamente, permiten un confort óptimo para el paciente, menos artefactos de imagen y menor dosis de radiación.




Excelencia incomparable en imagenología. La mesa superior de fibra de carbono premium, curvada y con bordes redondeados, ofrece una radiolucencia excepcional de 0,4 mm Al. Eq.*, reduciendo considerablemente la dosis de radiación, mientras mejora la calidad de imagen. Experimente la diferencia de una imagen de alto rendimiento.

El posicionamiento flexible del paciente permite obtener los mejores resultados de imagen en una amplia variedad de aplicaciones.
La parte delantera de la mesa permite una capacidad máxima de peso de 300 kg / 661 lbs para procedimientos que requieran posicionamiento del paciente en decúbito supino, lateral o prono.

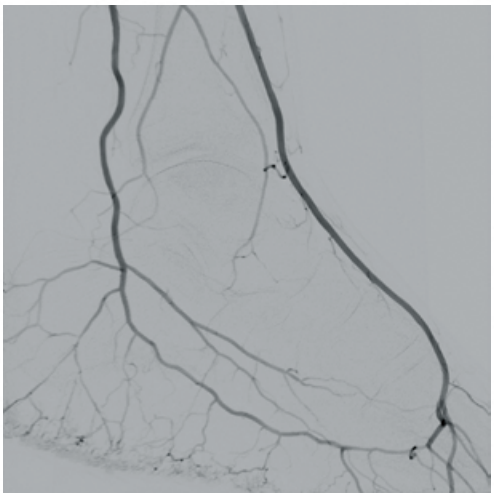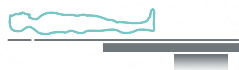

* Valor de radiolucidez para toda la superficie de la mesa, según el estándar internacional:
0.4 mm Al. Eq. según IEC 60601-1-3:1994 / 0.65 mm Al. Eq. según IEC 60601-2-54:2022 Ed. 2.0.

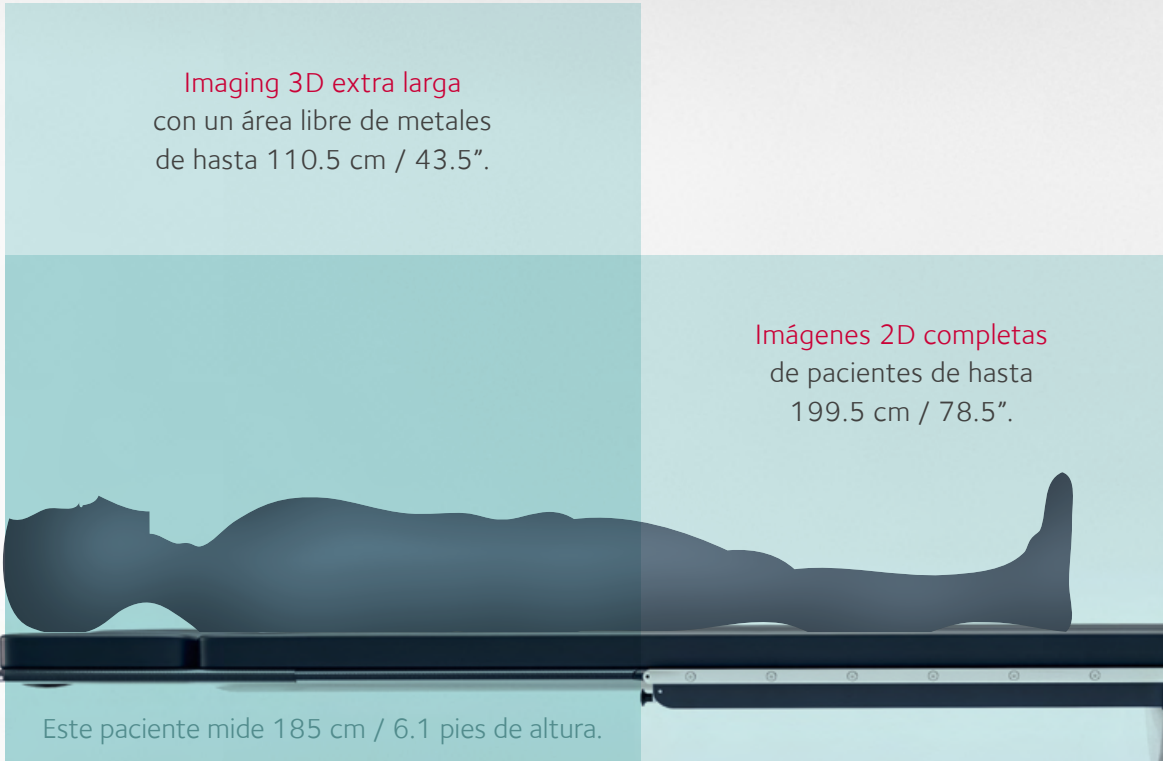

Low-Dose Enabler™, compatible con arco en C
La alta radiolucencia de la superficie de la mesa, combinada con un excelente acceso para el Arco en C, mejora la calidad de la imagen, mientras que los bordes redondeados reducen los artefactos en la imagen.

Experimenta el exclusivo True Free Float™, la tecnología de flotación más suave y sensible del mercado. Su diseño innovador ofrece una precisión impresionante y una libertad de movimiento sin igual en cualquier dirección horizontal, todo mientras reduce los tiempos de los procedimientos y permite un control total para el médico.


Control sin esfuerzo

El manija de flotación es como una extensión de la mano. El médico controla perfectamente los movimientos con asombrosa facilidad, suavidad y precisión. Potencia aún más el rendimiento con el Módulo de Control Integrado (opcional), que combina el True Free Float™ y las funciones del control manual. Todo, en una sola mano.



Ahorre tiempo intraoperatorio moviéndose rápida, suavemente y deteniéndose con precisión en la anatomía de interés.

Simplifique el flujo de trabajo quirúrgico reduciendo la necesidad de reposicionar el Arco en C en cualquier dirección.

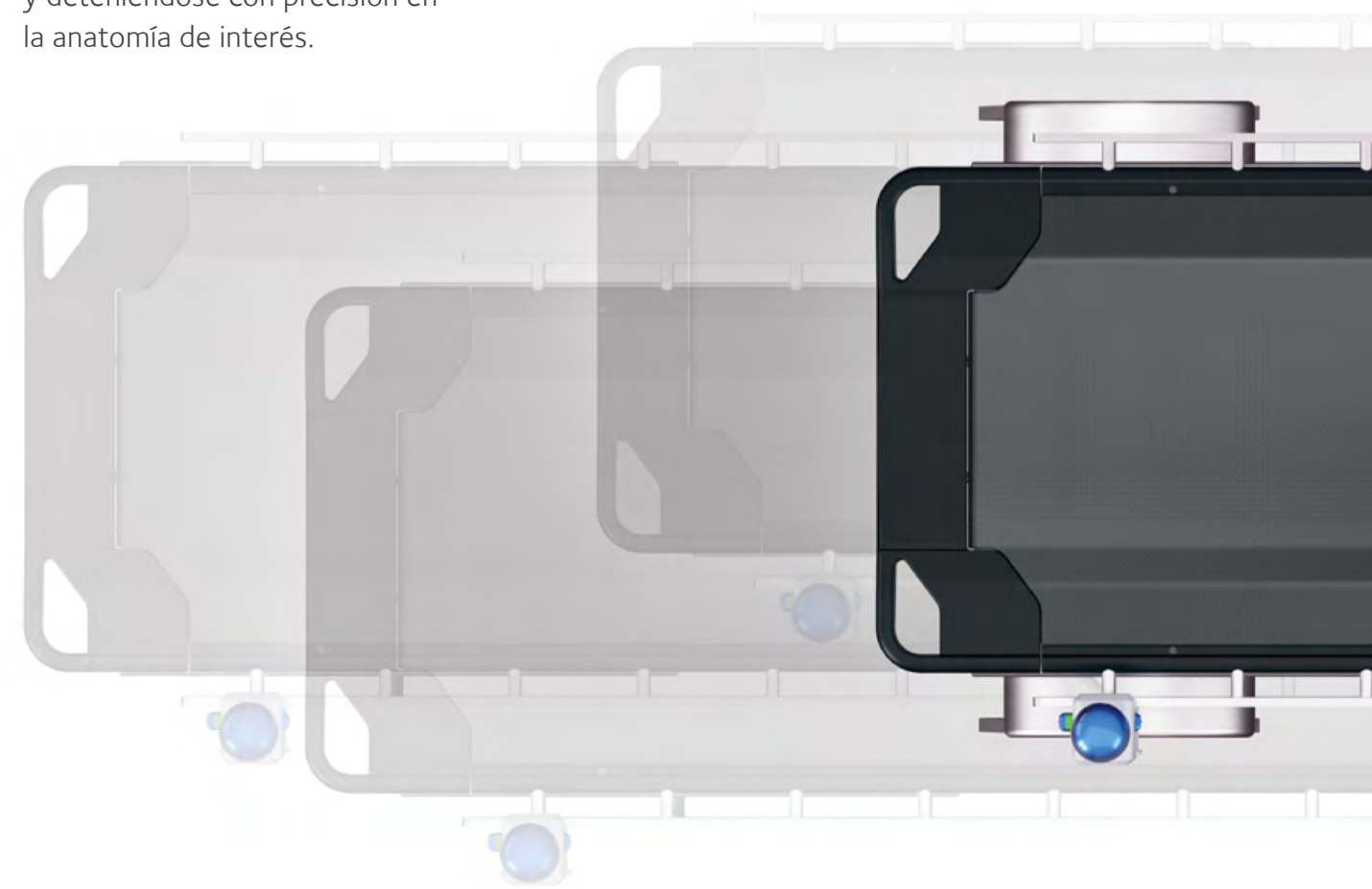

Adquiera imágenes continuas de cabeza a pies con el excepcional flotante longitudinal de 90 cm / 35.4", flotante lateral de 25 cm / 9.8" y flotante diagonal de 93.4 cm / 36.8".

Movimientos innovadores para hoy. Con nuevos electromotores, el imagiQ3™ Legacy ofrece movimientos rápidos, suaves y silenciosos de ajuste de altura, ISO-Roll™ patentado, mayor Trendelenburg y Posición Cero. Las numerosas características de seguridad ayudan a prevenir maniobras y movimientos inseguros. Operar con confianza.

ISO-Roll™ patentado

La tecnología patentada del ISO-Roll™ con inclinación de $\pm 15^\circ$ mantiene el enfoque de la imagen durante el reposicionamiento del paciente, incluso en inclinación lateral total. Mantenerse en el objetivo sin necesidad de reajustar el Arco en C reduce la exposición a la radiación.



Electrónica
para movimientos
más precisos



hasta
10 días

Baterías con mayor capacidad para un uso prolongado

La mesa puede usarse con batería hasta 10 días (dependiendo del modelo). Equipado con baterías de litio de carga rápida, siempre está lista para usarse, incluso mientras se carga.



40 (dB)*

Movimientos silenciosos para un mejor enfoque

Los movimientos suaves y silenciosos del imagiQ3™ Legacy contribuyen a un mejor ambiente, facilitando el enfoque del personal clínico en el quirófano.

*promedio basado en un uso.



10+ características

Control manual robusto con características de seguridad

Robusto y sencillo, el control manual retroiluminado incluye un Indicador de Posición Segura y un botón rápido de Trendelenburg para emergencias, complementando las características de seguridad de la mesa.



Trendelenburg reforzado

Incluso con una capacidad de carga de 300 kg / 661 lbs, el imagiQ3™ Legacy ofrece 25° de Trendelenburg y 21° de Trendelenburg invertido.

Diseñado para durar. El imagiQ3™ Legacy tiene partes de diseño inteligente y características avanzadas, como la Integración de Servicios, que facilitan y agilizan el mantenimiento y las reparaciones. Con su alta calidad, la mesa garantiza un flujo de trabajo sin interrupciones y sin estrés tanto para el personal clínico como para el equipo biomédico.



Calidad Premium

Mesas de operaciones innovadoras diseñadas y fabricadas en Suecia desde 1841, STILLE siempre asegura que el diseño sea fiable e ingenioso, desde las barandillas laterales de acero inoxidable extremadamente robustas hasta la fibra de carbono propietaria y las tecnologías integradas.



Garantía duradera

Una garantía significativa dice mucho sobre la excelente capacidad de durabilidad de las mesas. El imagiQ3™ Legacy está cubierto por una garantía de 4 años en repuestos (estándar en América del Norte / EE. UU., extendida en la UE / Resto del Mundo).



Nuestra responsabilidad

Creado con un enfoque sostenible, el imagiQ3™ Legacy permite la reutilización de la mayoría de los accesorios imagiQ2™. Incluye una batería con una vida útil técnica más larga y cables universales con conectores plug-and-play.



- Contacta directamente con nuestro equipo de soporte
- >
- Otorgar acceso temporal a la mesa a través de la aplicación de Integración de Servicios
- >
- Obtén un análisis rápido y una solución eficiente

Ahorra tiempo y dinero con un servicio y reparaciones aún mejores


Conecta tu mesa con la innovadora función de Integración de Servicios. Monitorea el estado de la mesa y permite que nuestros ingenieros te asistan con la resolución de problemas de forma remota sin demoras. Esta tecnología innovadora puede reducir significativamente la necesidad de diagnósticos y reparaciones costosas en el sitio. Es fácil de usar, solo conecta la mesa con un smartphone a través de un acceso Bluetooth seguro.

Código QR para acceso rápido a la página de soporte

Simplemente escanea el código QR con un smartphone y accede a la Información de la Página de Soporte, que incluye el número de serie de la mesa, números de piezas, recursos multimedia y las acciones de la Página de Soporte para reportar un problema.



La perfección es una cuestión de detalles.
Explora el poder de imagiQ3™ Legacy.

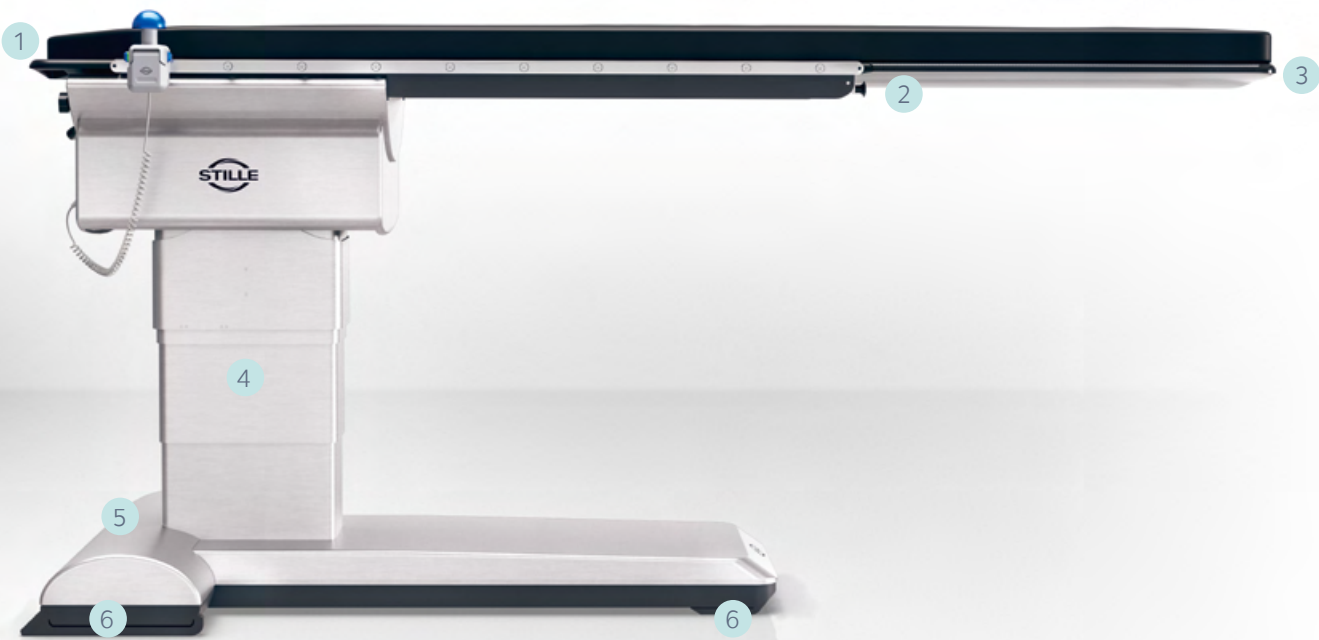

1.

6 cm de grosor de colchón de confort

con alivio de presión y propiedades antiestáticas
2.

Barandillas laterales de acero inoxidable

menos propensas a daños que las barandillas de fibra de carbono
3.

Superficie de la mesa curva de fibra de carbono

garantizando confort, estabilidad y reduciendo la dosis de rayos X
4.

Tapas de columnas de acero inoxidable

higiénicas y altamente resistentes, las mejores de su clase en cuanto a resistencias a la compresión y a la flexión
5.

Cobertura de emergencia sin restricciones

para mayor seguridad: control manual adicional y posición manual Trend / CPR
6.

Cuatro ruedas giratorias retráctiles

para estacionar la mesa sobre su base, proporcionando estabilidad óptima, permitiendo maniobras de RCP y cirugía abierta

		imagiQ3™ Legacy
Número de pieza	América del Norte, 3-modelo de batería UE / Resto del Mundo, 2-modelo de batería UE / Resto del Mundo, 3-modelo de batería	550-1700 550-1702 550-1703
Superficie de la mesa	longitud anchura longitud radiotransparente con extensión 3D sin extensión longitud de imagen de 360° con extensión 3D sin extensión intercambiable	240 cm / 94.5" 55 cm / 21.7" 199.5 cm / 78.5" 169.5 cm / 66.7" 110.5 cm / 43.5" 80.5 cm / 31.7" ✓
True Free Float™	longitudinal lateral diagonal bloqueo de flotación	90 cm / 35.4" 25 cm / 9.8" 93.4 cm / 36.8" Sistema de bloqueo rápido STILLE
Movimientos motorizados	ajuste de altura Trendelenburg ISO-Roll™	71-109 cm / 28.0"-42.9" +25° / -21° +15° / -15°
Carga máxima en cualquier posición de la mesa	paciente en el extremo superior 3 paciente en el extremo inferior 1	300 kg / 661 lbs 150 kg / 331 lbs
Barandillas laterales	fijas y estandarizadas	142.5 cm / 56.1"
Dimensiones de la mesa	longitud anchura altura	240 cm / 94.5" 77.2 cm / 30.4" 71-109 cm / 28.0"-42.9"
Transporte	ruedas y dirección de transporte asas de transporte transporte del paciente	4 ruedas retráctiles y giratorias ✓ ✓
Fuente de energía (100-250V)	energía AC directa energía DC de batería de Li-ion	✓ ✓
Garantía	América del Norte UE / Resto del Mundo	3 años en mano de obra, 4 años en repuestos 2 años en mano de obra y repuestos (estándar), 4 años en repuestos (ampliado)



Manteniendo lo mejor, mejorando el resto.
Ahorre costos reutilizando los accesorios imagiQ2™ o accesorios montados en las barandillas laterales. El catálogo de accesorios imagiQ3™ Legacy está disponible para personalizar su mesa.

STILLE – Surgical perfection. For life.

Stille es una de las compañías de dispositivos médicos más antiguas del mundo, con más de 180 años de experiencia. En STILLE, desarrollamos, producimos y vendemos instrumentos quirúrgicos y mesas de cirugía para médicos de todo el mundo.

Mesas Quirúrgicas

Ofrecemos mesas especiales para procedimientos mínimamente invasivos, con precios, seguridad y características optimizadas tanto para entornos de pacientes hospitalizados como ambulatorios.

Las mesas de imágenes quirúrgicas móviles STILLE Medstone contribuyen a mejorar la eficiencia en el quirófano, al mismo tiempo que ofrecen soluciones de valor con calidad y fiabilidad.

La mesa de imágenes quirúrgicas STILLE imagiQ3™, con capacidad de baja radiación, está optimizada para entornos avanzados de Hybrid OR (Quirófano Híbrido), así como para procedimientos periféricos e intervencionistas.

Instrumentos Quirúrgicos

Contamos con una oferta completa de instrumentación forjada y hecha a mano para todos los campos de la cirugía abierta, con un énfasis especial en cirugía cardiovascular, cirugía plástica reconstructiva y estética.

Nuestros instrumentos cuentan con un diseño delicado, durabilidad líder en la industria y con una sensación única, lo que ha hecho de STILLE un proveedor conocido y altamente respetado por cirujanos de todo el mundo.

Aprende más en www.stille.se

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30 Torshälla
Suecia
☎ +46 8 588 580 00
✉ sales@stille.se
🌐 www.stille.se

STILLE Surgical Inc.

840 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
Estados Unidos
☎ 1.800.665.1614
✉ sales.us@stille.se
🌐 www.stille.se/us



Surgical perfection. For life.



Estos productos pueden no estar disponibles en todas las regiones. Por favor, contacte con su representante de STILLE para obtener más información sobre la disponibilidad en el mercado. Este documento describe correctamente los dispositivos en el momento en que fue impreso. Por favor, siempre consulte el manual del usuario para cualquier modificación del producto. Las imágenes de los productos mostradas son sólo para fines ilustrativos y pueden no representar exactamente el producto. Las dimensiones descritas en este documento pueden variar con una tolerancia de $\pm 2.0^\circ$ para los ángulos y ± 1.25 cm para las longitudes.