



Surgical perfection. For life.



STILLE imagiQ3™ Legacy

Ga een stap verder in beeldperfectie

Perfectie overstegen met ultieme visualisatie en OK-efficiëntie

Gebouwd op tientallen jaren ervaring met duizenden imagiQ™-tafels over de hele wereld, integreert imagiQ3™ Legacy nieuwe technologieën terwijl de beroemde imagiQ™ hoge radiolucentie en legendarische True Free Float™ behouden blijven. Een stap verder, imagiQ3™ Legacy verlegt de grenzen van perfectie en is een meesterwerk in operatiekamers en cathlabs.

Veelzijdig klinisch gebruik*

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ✓ Vasculair | ✓ Pulmonologie | ✓ Gastro-enterologie / ERCP |
| ✓ Elektrofysiologie /
Ritmologie | ✓ Ruggengraat | ✓ Veterinair** |
| | ✓ Pijnbestrijding | |

* Binnen het beoogde gebruik

** Enkel VS

Zweedse kwaliteit en design

STILLE imagiQ™ tafels zijn de beste mobiele beeldvormingstafels die zijn geïmiteerd, maar nooit geëvenaard. Ze zijn zorgvuldig ontworpen en bieden optimaal comfort voor de patiënt, minder beeldartefacten en minder röntgenstraling.





Ongeëvenaarde uitmuntendheid in beeldvorming.


Het gebogen premium koolstofvezel tafelblad met afgeronde randen biedt een uitstekende radiolucentie van 0,4 mm Al. Eq.*, waardoor de stralingsdosis aanzienlijk wordt verlaagd en de beeldkwaliteit wordt verbeterd. Ervaar het verschil van hoogwaardige beeldvorming.

Flexibele patiëntpositionering zorgt voor de beste beeldresultaten in een breed scala aan toepassingen.

De voorkant van de tafel heeft een maximale draagkracht van 300 kg voor procedures waarbij de patiënt op zijn rug, zij of buik moet liggen.

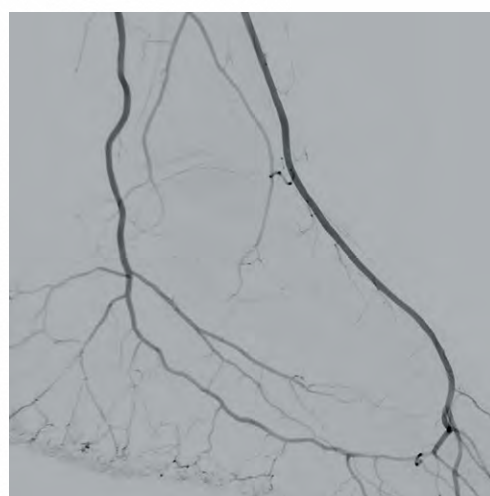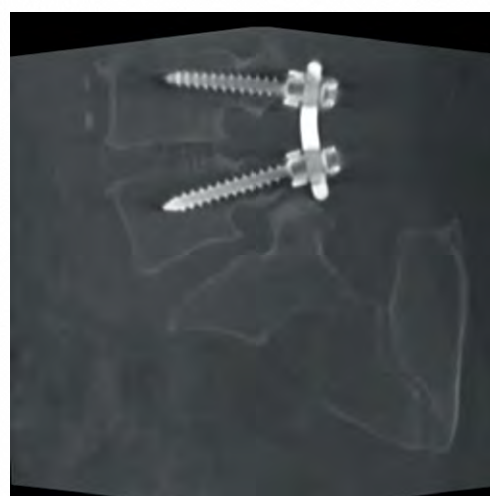

* Radiolucentiewaarde voor het gehele tafelblad, volgens de internationale norm:
0,4 mm Al. Eq. volgens IEC 60601-1-3:1994 /
0,65 mm Al. Eq. volgens IEC 60601-2-54:2022 Ed. 2.0.

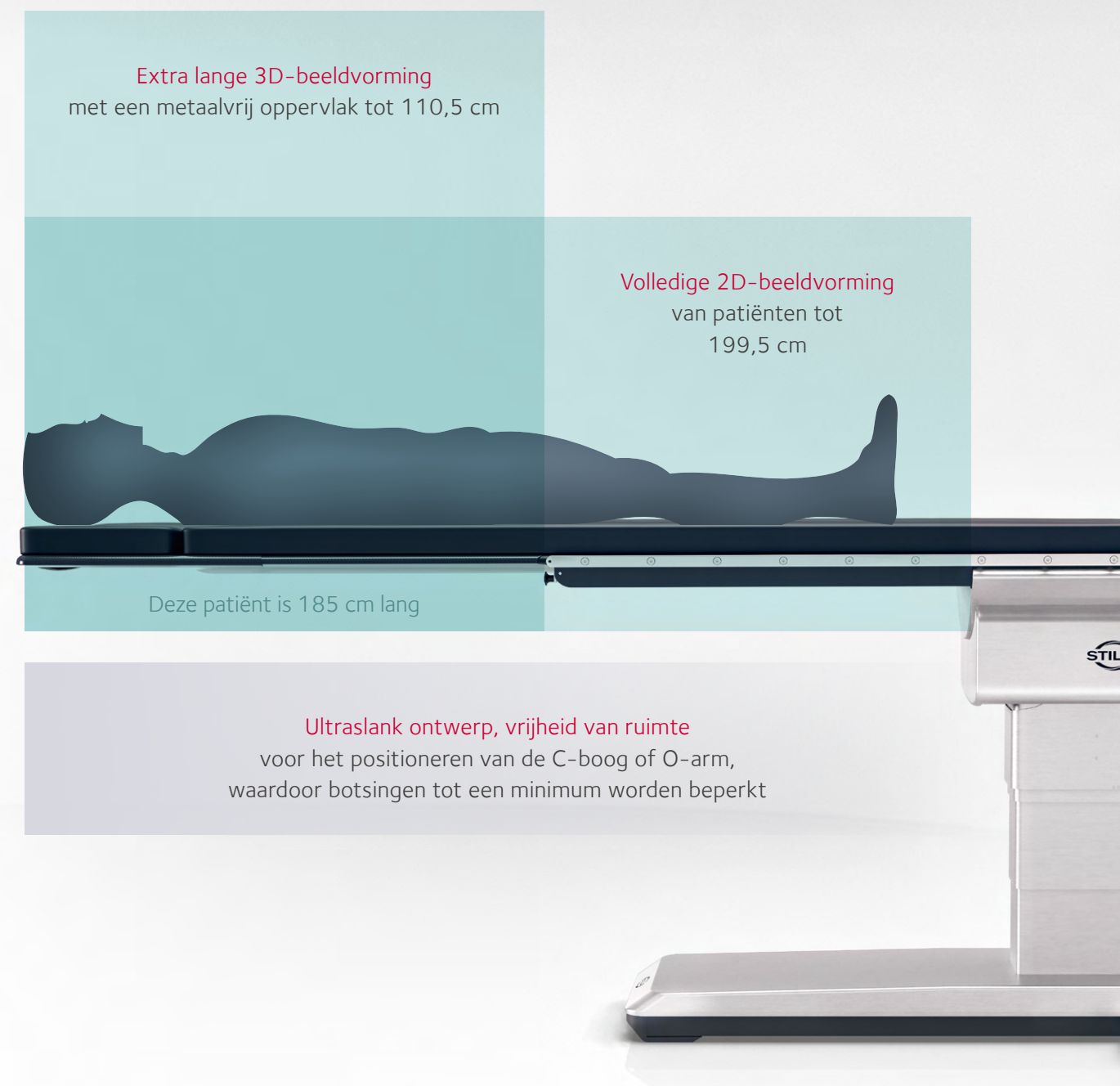

Low-Dose Enabler™, C-boogvriendelijk

De hoge radiolucentie van het tafelblad in combinatie met de goede toegang voor de C-boog verbetert de beeldkwaliteit, terwijl afgeronde randen beeldartefacten verminderen.

Ervaar de unieke True Free Float™, de soepelste en meest responsieve zwevende technologie op de markt. Het geavanceerde ontwerp biedt verbluffende precisie en ongeëvenaarde bewegingsvrijheid in elke horizontale richting, terwijl de proceduretijden worden verkort en de arts volledige controle heeft.


Moeiteloze controle

De ergonomische Pan Handle is als een verlengstuk van de hand. De arts controleert de bewegingen perfect met verbazingwekkend gemak, soepelheid en nauwkeurigheid. Presteer nog beter met de Integrated Control Module (optioneel), die de True Free Float™ en functies van de handbediening combineert. Alles, in één hand.



Bespaar intra-operatieve tijd door snel en vloeiend te bewegen en precies te stoppen waar gewenst.

Vereenvoudig de chirurgische workflow door de noodzaak voor het herpositioneren van de C-boog in welke richting dan ook te beperken.

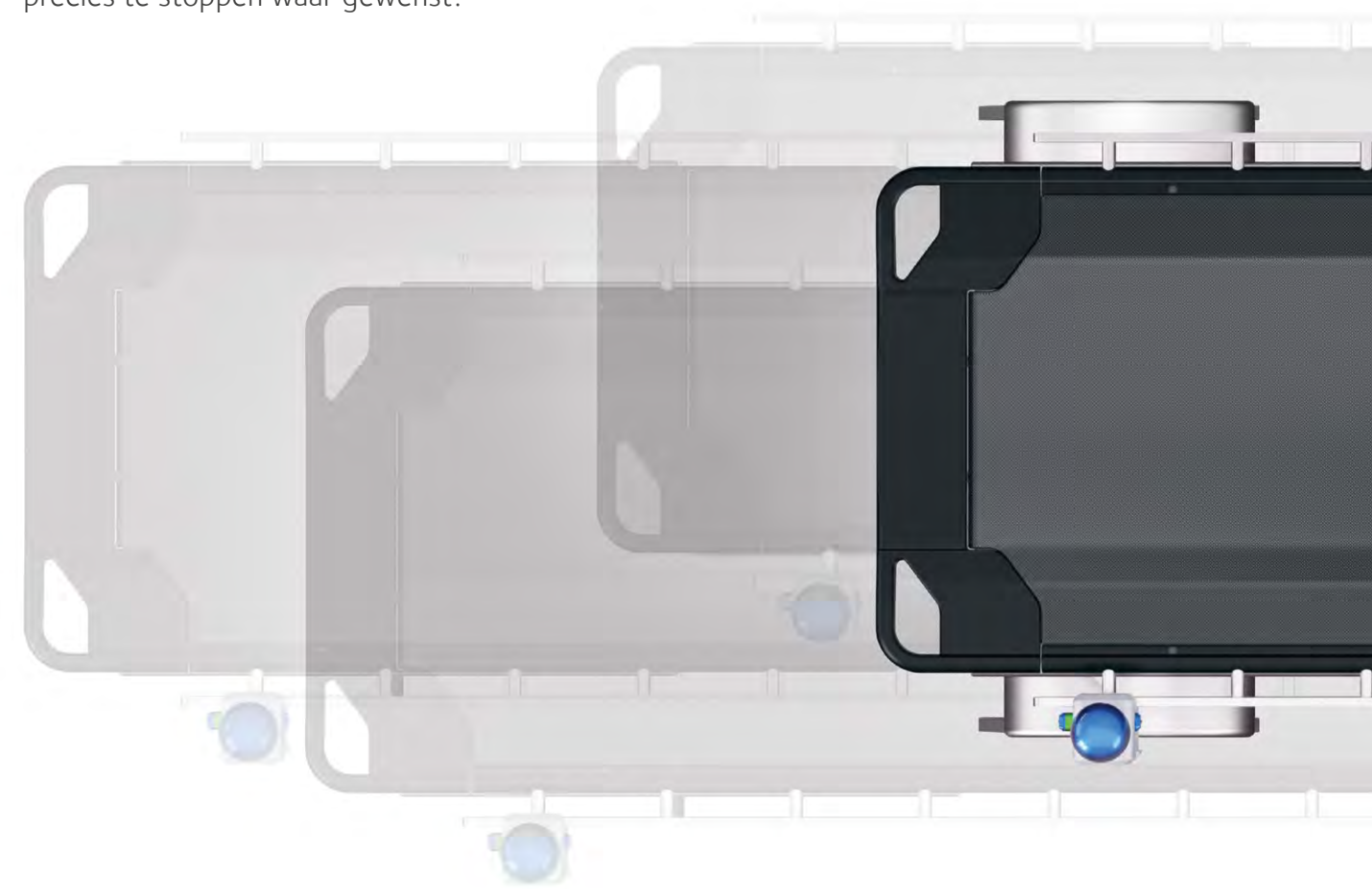

Verkrijg doorlopende beelden van top tot teen met de uitzonderlijke 90 cm longitudinale beweging, 25 cm laterale beweging en 93,4 cm diagonale beweging.

Bewegingen die zijn vernieuwd voor vandaag.

Met nieuwe elektromotoren biedt de imagiQ3™ Legacy snelle, soepele en stille bewegingen van hoogteverstelling, gepatenteerde ISO-Roll™, verhoogde Trendelenburg en nul positie. De talrijke veiligheidsfuncties helpen onveilige bediening en bewegingen te voorkomen. Werk met vertrouwen.

Gepatenteerde ISO-Roll™

De gepatenteerde technologie van de ISO-Roll™ $\pm 15^\circ$ behoudt de beeld-focus tijdens het herpositioneren van de patiënt, zelfs in volledige laterale kanteling. Door op het doel te blijven zonder de C-arm opnieuw aan te passen, wordt de blootstelling aan straling verminderd.



Elektrotechniek
voor meer precieze
bewegingen



tot
10 dagen

Superieure batterijen voor langdurig gebruik

De tafel kan tot 10 dagen op batterijvoeding worden gebruikt (afhankelijk van het model). Uitgerust met snel ladende lithiumbatterijen is hij altijd klaar voor gebruik, zelfs tijdens het opladen.



40 (dB)*

Stille bewegingen voor een betere focus

De stille en soepele bewegingen van de imagiQ3™ Legacy dragen bij aan een betere werkomgeving, waardoor het klinische personeel zich beter kan concentreren in de operatiekamer.

*Gemiddelde gebaseerd op normaal gebruik



10+
functies

Robuuste handbediening met veiligheidsvoorzieningen

De robuuste en eenvoudige handbediening met achtergrondverlichting beschikt over een veilige positie-indicator en een snelle Trendelenburg-knop voor noodgevallen, ter aanvulling op de veiligheidsfuncties van de tafel.



Uitgebreide Trendelenburg

Zelfs met een draagvermogen van 300 kg, biedt de imagiQ3™ Legacy 25° Trendelenburg en 21° omgekeerd Trendelenburg.

Ontworpen om lang mee te gaan. De imagiQ3™ Legacy heeft slim ontworpen onderdelen en geavanceerde functies zoals Service Integration die hem eenvoudig en snel te onderhouden en repareren maken. Met zijn high-end kwaliteit zorgt de tafel voor een naadloze en stressvrije workflow voor zowel het klinische personeel als het biomedische team.



Premiumkwaliteit

Innovatieve operatietafels ontworpen en geproduceerd in Zweden sinds 1841, STILLE zorgt er altijd voor dat het ontwerp ingenieus en betrouwbaar is, van extreem robuuste roestvrijstalen zijrails tot gepatenteerde koolstofvezel en ingebedde technologieën.



Lange garantie

Omdat uitgebreide garantie veel zegt over de uitstekende kwaliteit van de tafels, heeft de imagiQ3™ Legacy 4 jaar garantie op onderdelen (EU/RoW uitgebreid).



Onze verantwoordelijkheid

Gemaakt met een duurzame aanpak, imagiQ3™ Legacy maakt hergebruik van de meeste imagiQ2™ accessoires mogelijk. Het bevat een batterij met een langere technische levensduur en universele kabels met plug-and-play-connectoren.



Neem contact op met onze ondersteuning



Geef tijdelijke toegang tot de tafel via de Service Integration-app



Krijg een snelle analyse en vind oplossingen

Bespaar tijd en geld met nog betere service en reparaties


Verbind uw tafel met de revolutionaire Service Integration-functie. Controleer de staat van de tafel en laat onze technici u zonder vertraging helpen met het op afstand oplossen van problemen. Deze innovatieve technologie kan de noodzaak voor kostbare diagnose en reparaties op locatie aanzienlijk verminderen. Eenvoudig te gebruiken, verbind de tafel gewoon met een smartphone via een beveiligde Bluetooth-verbinding.

QR-code voor snelle toegang tot de ondersteuningspagina

Scan eenvoudig de QR-code met een smartphone en krijg toegang tot de informatie op de ondersteuningspagina, inclusief het serienummer van de tabel, onderdeelnummers, mediabronnen en de acties op de ondersteuningspagina om een probleem te melden.



Perfectie is een kwestie van details.
Ontdek de kracht van imagiQ3™ Legacy.

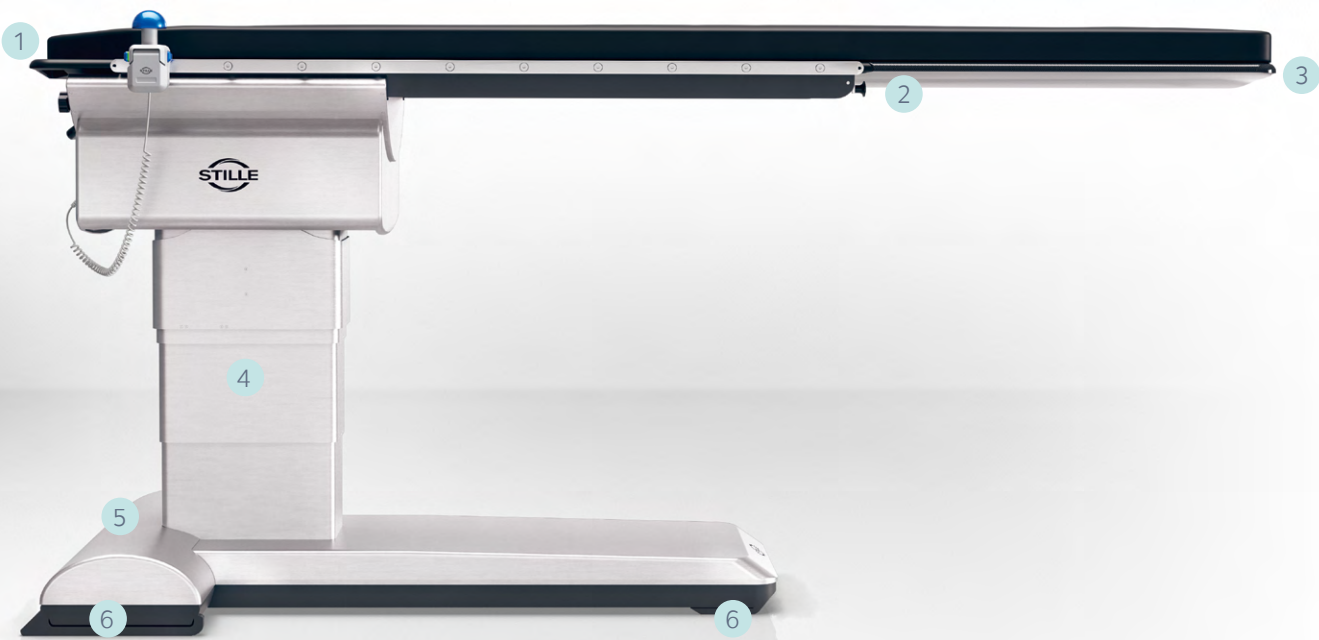

1.
**6 cm dik
comfort matras**
met drukverlagende en
antistatische eigenschappen

2.
**Zijrails van
Roestvrij staal**
minder vatbaar voor schade
dan koolstofvezel zijrails

3.
**Gebogen kool-
stofvezel tafelblad**
zorgt voor comfort, stabiliteit
en een lagere röntgendosis

4.
**Behuizing van
Roestvrij staal**
hygiënisch en zeer resistent,
de beste in zijn klasse voor
druk- en buigsterktes

5.
**Toegankelijke
noodfuncties**
voor extra veiligheid:
reserve handbediening
en handmatige
Trend/CPR-positie

6.
**Vier draaibare
intrekbare wielen**
om de tafel op zijn onderstel te
parkeren voor optimale stabi-
liteit, waardoor reanimatie en
open chirurgie mogelijk zijn

		imagiQ3™ Legacy
Onderdeelnummer	EU/ RoW, model met 2 batterijen EU/RoW, model met 3 batterijen	550-1702 550-1703
Tafelblad	lengte breedte radiolucente lengte 360° beeldlengte verwisselbaar	240 cm 55 cm met 3D-extensie 199,5 cm zonder verlenging 169,5 cm met 3D-extensie 110,5 cm zonder verlenging 80,5 cm ✓
True Free Float™	longitudinaal lateraal diagonaal Zweefstop	90 cm 25 cm 93,4 cm STILLE snelsstopsysteem
Gemotoriseerde bewegingen	hoogteverstelling Trendelenburg ISO-Roll™	71-109 cm +25° / -21° +15° / -15°
Veilige werklast (in elke tafelpositie)	patiënt aan tafel hoofdeinde patiënt aan tafel achterkant	300 kg 150 kg
Zijrails	vast en gestandaardiseerd	142,5 cm
Afmetingen tafel	lengte breedte hoogte	240 cm 77,2 cm 71-109 cm
Vervoer	wielen en besturing transport handgrepen patiëntenvervoer	4 intrekbare en zwenkbare wielen ✓ ✓
Stroombron	100-250 Volt AC wisselstroom Li-ion batterij DC-voeding	✓ ✓
Garantie	EU/RoW	2 jaar op arbeid en onderdelen (standaard), 4 jaar op onderdelen (verlengd)



Het beste behouden en de rest verbeterd. Bespaar kosten door imagiQ2™ accessoires of accessoires die op de zijrail zijn gemonteerd te hergebruiken. Met de imagiQ3™ Legacy-accessoirecatalogus kunt u uw tafel personaliseren.

STILLE – Surgical perfection. For life.

STILLE is een van de oudste bedrijven in medische hulpmiddelen ter wereld met meer dan 180 jaar ervaring. Bij STILLE ontwikkelen, produceren en verkopen we chirurgische instrumenten en operatietafels aan artsen over de hele wereld.

Chirurgische tafels

Wij bieden speciale tafels voor minimaal invasieve procedures, met veiligheid en functies die zijn geoptimaliseerd voor zowel klinische als poliklinische praktijken.

De mobiele chirurgische beeldvormingstafels van STILLE Medstone dragen bij aan een verbeterde efficiëntie in de operatiekamer en vormen tegelijkertijd betaalbare oplossingen met zowel kwaliteit als betrouwbaarheid.

De STILLE imagiQ3™ chirurgische beeldvormingstafel met zijn lage-dosis capaciteiten is geoptimaliseerd voor geavanceerde mobiele hybride OK-omgevingen en voor perifere en interventionele procedures.

Chirurgische instrumenten

Wij hebben een compleet aanbod van hand gesmede, instrumenten voor alle gebieden van open chirurgie, met een speciale nadruk op cardiovasculaire chirurgie, reconstructieve en esthetische plastische chirurgie.

Onze instrumenten hebben een delicaat ontwerp, toonaangevende duurzaamheid en een uniek gevoel, wat STILLE tot een bekende en zeer gerespecteerde leverancier heeft gemaakt door chirurgen over de hele wereld.

Meer informatie vindt u op www.stille.se

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30 Torshälla
Zweden
☎ +46 8 588 580 00
✉ sales@stille.se
🌐 www.stille.se

STILLE Surgical Inc.

840 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
Verenigde Staten
☎ 1.800.665.1614
✉ sales.us@stille.se
🌐 www.stille.se/us



Surgical perfection. For life.



Deze producten zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar. Neem contact op met uw STILLE-vertegenwoordiger voor meer informatie over de beschikbaarheid in uw regio. Dit document beschrijft de apparaten correct op het moment dat het document werd afgedrukt. Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding voor eventuele productwijzigingen. Dit document is een vertaling uit het Engels. Bij tegenstrijdigheden is de Engelse versie bepalend. De getoonde productafbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product. De in dit document beschreven afmetingen kunnen afwijken met een tolerantie van $\pm 2,0^\circ$ voor hoeken en $\pm 1,25$ cm/0,5" voor lengtes.