



- ✓ Hohe Strahlendurchlässigkeit
- ✓ Schwimmende Niedrigdosis-Tischplatte
- ✓ Abgerundete Kanten

Chirurgischer Bildgebungstisch STILLE imagiQ2™


Verkürzen Sie Eingriffszeiten und reduzieren Sie die Strahlenbelastung

Der chirurgische Bildgebungstisch STILLE imagiQ2™ stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Dosisreduzierung dar und macht den OP zu einem noch sichereren Ort für die Patienten und das gesamte chirurgische Team.

Verbessern Sie die Effizienz und verkürzen Sie Eingriffszeiten

Die frei schwimmende Tischplatte des STILLE imagiQ2™ bietet beispiellose Kontrolle und Bewegungsfreiheit in jede gewünschte Richtung verbunden mit sanften Bewegungen. Wie eine Verlängerung der Hand des Chirurgen erhöht True Free Float™ die Effizienz im OP und verkürzt Behandlungszeiten.

Die patentierte Technologie der ISO-ROLL™ Lageverschiebung ($\pm 15^\circ$) hilft, die Bildschärfe sogar bei voller Querverschiebung aufrechtzuhalten und minimiert so die Repositionierung von Patient und C-Bogen, wodurch gleichzeitig die Streustrahlung reduziert wird.

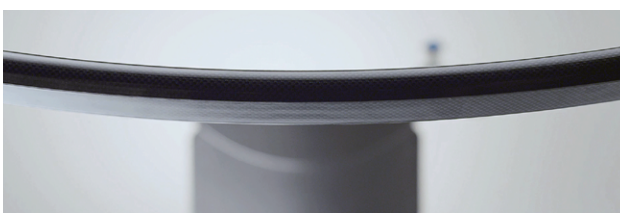

Entwickelt für schräge Bildgebung und die Beseitigung von Bildartefakten bei gleichzeitiger Verbesserung der Bildqualität.

Reduzieren Sie die Strahlenbelastung und verbessern Sie die Bildqualität

Die einzigartige Hochleistungs-Tischplatte aus Karbonfaser bietet eine hervorragende Strahlendurchlässigkeit von 0,4mm Al-Äquivalenz, sodass der C-Bogen die Strahlenbelastung reduzieren kann, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Das sind bis zu 60% höhere Strahlendurchlässigkeit als bei durchschnittlichen Tischen auf dem Markt.

Das ultraschlanke Design, die extrem niedrige Basis und die einziehbaren Räder maximieren den Zugang des C-Bogens und ermöglichen es, den Bildempfänger näher an den Patienten heranzuführen, wodurch die Strahlenbelastung verringert und gleichzeitig die Bildqualität verbessert wird.


Wählen Sie einen Low-Dose Enabler™

Die True Free Float™-Technologie, die hervorragende Strahlendurchlässigkeit der Tischplatte sowie die einziehbaren Räder machen den STILLE imagiQ2™ zu einem echten Low-Dose Enabler™ und zur idealen C-Bogen Ergänzung für den mobilen Hybrid-OP oder die Office Suite.

Bewegungsspielraum*

Höhenverstellung	71,0-109,0 cm
Trendelenburg	±20° (±25° optional)
Seitliche Neigung (ISO-ROLL™)	±15°
Längs Schwimmen	90,0 cm
Quer Schwimmen	25,0 cm
Diagonal Schwimmen	93,4 cm

* ± 2,0° und ± 1,25 cm Toleranz

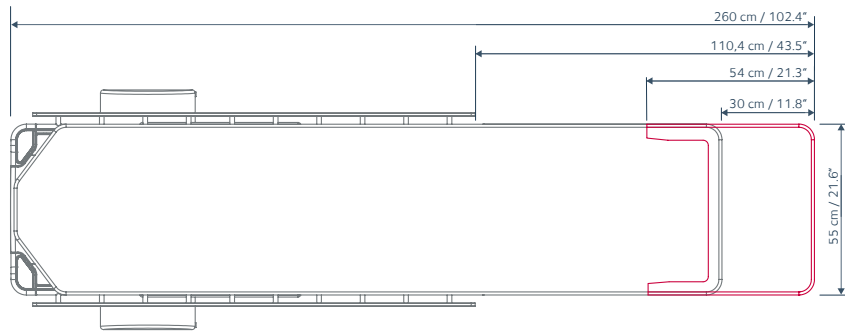

Produktspezifikationen STILLE imagiQ2™

Gewichtskapazität	300 kg in jeder Position; die Tischplatte muss nicht zentriert werden.
Länge, Breite der Tischplatte	L= 230 cm; B= 55 cm
Durchleuchtungslänge	199,2 cm mit 3D Kopfstütze / 169,2 cm ohne Kopfstütze
Strahlendurchlässige Tischplatte	Firmeneigene, patentierte Karbonfaserstruktur Al 0,4 mm
Schwimmen und Verriegeln	STILLE True Free Float™ und STILLE Schnellverriegelungssystem
Betriebsbedingungen	100% kontinuierlich
Stromversorgung: 100-250V	Netzanschluss und Akkubetrieb
Länge, Breite, Höhe	L= 234 cm; B= 77,2 cm; H= 71-109 cm
Räder und Lenkung	4 schwenkbare und einziehbare Räder
Seitenschienen	Seitlich an 142,5 cm entlang der Tischplatte befestigt
Austauschbare Tischplatte	Ja, zukunftssichere Plattform für langfristigen Einsatz und einfachen Transport
Transportgriff	Ja, Farbe: silber

Anpassen des imagiQ2™ an Ihre Bedürfnisse

Mobilitäts-Erweiterungssatz (Artikelnummer: 535-1711) ► Wenn der Tisch häufig zum Transport innerhalb der Klinik eingesetzt werden soll, sorgt der Mobilitäts-Erweiterungssatz für eine verbesserte Beweglichkeit. Alle Räder sind schwenkbar geführt, und ein zusätzliches fünftes Rad sorgt für optimale Beweglichkeit.

Trendelenburg-Erhöhungssatz (Artikelnummer: 535-1713) ► Maximieren Sie die Trendelenburg-Fähigkeiten, indem Sie den Trendelenburg-Erhöhungssatz wählen. Damit können Sie den Trendelenburg-Winkel von 20 auf 25 Grad erhöhen. Dieses Upgrade ist nur ohne den Last-Aufrüstsatz erhältlich. *Bitte beachten Sie, dass diese Option bei der ursprünglichen Bestellung vor der Lieferung angegeben werden muss. Dieses Upgrade kann nicht bei bereits gelieferten Geräten nachgerüstet werden.* Gewichtskapazität mit Trendelenburg-Erhöhungssatz: 225 kg. Transportgriff: Farbe dunkelgrau.

STILLE AB

Ekbacken 11
644 30 Torshälla
Schweden

☎ +46 8 588 580 00
✉ sales@stille.se
🌐 www.stille.se

STILLE Surgical Inc.

840 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
USA

☎ +1 800 665 1614
✉ sales.us@stille.se
🌐 www.stille.se/us

Diese Produkte sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren STILLE-Vertreter für weitere Informationen zur Marktverfügbarkeit. Dieses Dokument beschreibt diese Geräte korrekt zum Zeitpunkt der Drucklegung des Dokuments. Bitte beachten Sie bei Produktänderungen immer das Benutzerhandbuch. Dieses Dokument wurde aus dem Englischen übersetzt. Im Falle von Unstimmigkeiten ist die englische Version maßgebend. Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen der Produkte.