



Surgical perfection. For life.



Healthcare
& Pharmaceutical
Awards 2019



Best Surgical Imaging Table

Acortando el tiempo de cirugía mientras reduce la exposición a la radiación

La mesa de imágenes quirúrgicas imagiQ2™ representa un importante avance en el desarrollo de tecnología de baja radiación, haciendo que el quirófano sea un lugar todavía más seguro para el paciente y para todo el personal sanitario.

Incrementar la Eficiencia y Acortar los Tiempos de Cirujía

La tecnología True Free Float™, de la mesa imagiQ2™ de STILLE, ofrece un control y una libertad de movimiento sin precedentes en cualquier dirección, proporcionando una suavidad de movimientos de vanguardia. Como si fuera la extensión de la mano del cirujano, el True Free Float™ aumenta la eficiencia en el quirófano y acorta los tiempos de operación.

La tecnología patentada del movimiento iso-céntrico ISO-ROLL™ ($\pm 15^\circ$) ayuda a mantener el enfoque de la imagen, incluso en un desplazamiento lateral completo, minimizando la necesidad de reposicionar al paciente y/o al brazo en C, así como reduciendo la radiación dispersa.



Reduzca la exposición a la radiación y mejora la calidad de la imagen


El exclusivo tablero de fibra de carbono de alto rendimiento proporciona una radiolucidez sobresaliente de 0.4 mm de equivalencia de Al, lo que permite que el brazo en C reduzca la exposición a la radiación sin comprometer la calidad de la imagen. Siendo hasta un 60% más radiolúcido que las mesas promedio en el mercado.

Su diseño ultradelgado, ruedas retráctiles súper bajas y exclusivas para mesas flotantes, maximizan el acceso del brazo en C y permiten que el receptor de imágenes se acerque al paciente, reduciendo así la dosis de radiación y mejorando la calidad de la imagen.


Elija un Low-Dose Enabler™

En conjunto, la tecnología True Free Float™, la excelente radiotransparencia del tablero y las ruedas retráctiles, es lo que hace que STILLE imagiQ2™ sea una mesa de baja radiación Low-Dose Enabler™ convirtiéndose en el complemento ideal del brazo en C para quirófanos híbridos móviles o consultorios.

Obtenga más información en: www.stille.se/imagiq2

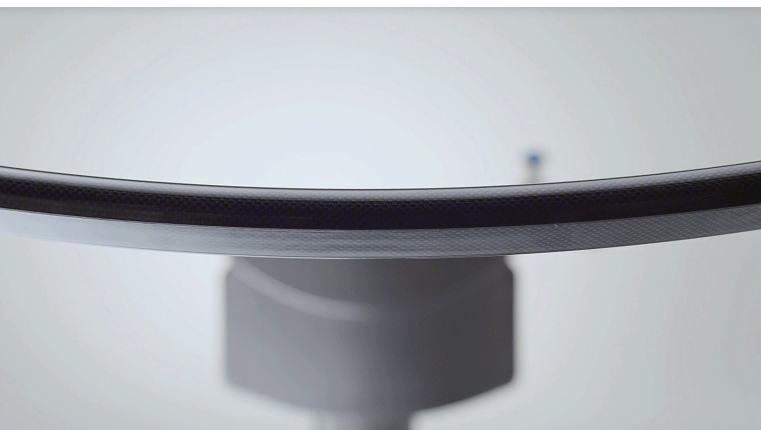

Tablero de baja radiación con bordes redondeados y con la radiolucidez más alta del mundo para mesas flotantes. Específicamente diseñado para imágenes oblicuas y para eliminar artefactos de imagen al tiempo que mejora la calidad de la misma.

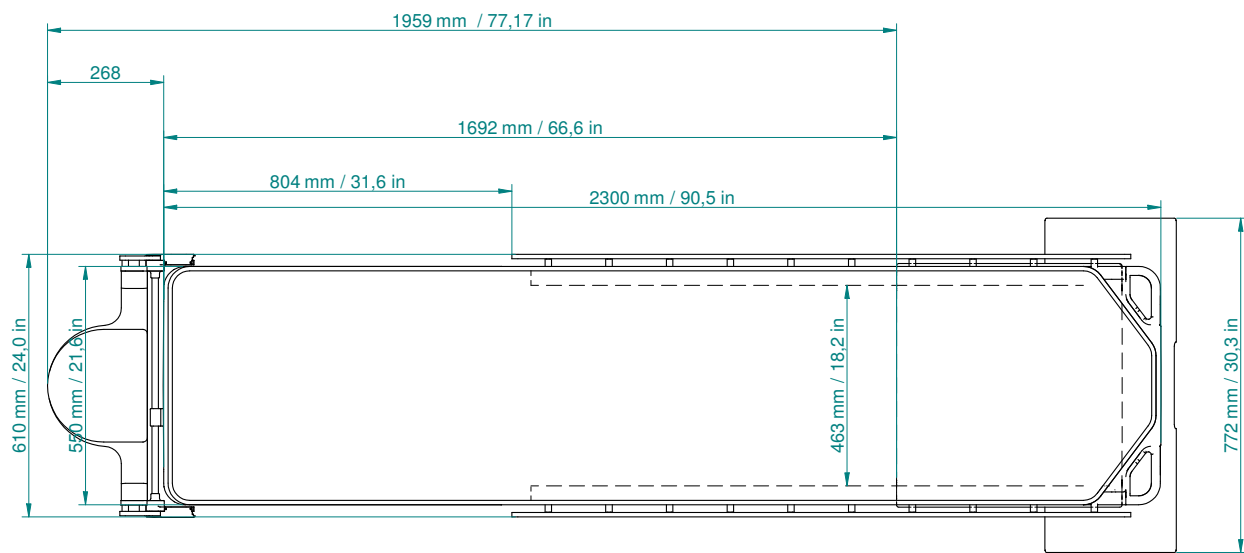

Especificaciones del producto, STILLE imagiQ2™

Característica	Descripción
Capacidad de carga	496 lb / 225 kg (opcional 661 lb / 300 kg con el kit de incremento de peso)
Tablero, largo y ancho	L= 90.5" / 230 cm ; A= 21.6" / 55 cm
Longitud radiotransparente	77.17" / 196 cm con cabecera (66.6" / 169.2 cm sin cabecera)
Tablero radiotransparente	Estructura de fibra de carbono patentada. Al 0.4 mm
Flotar y asegurar	STILLE True Free Float™ y STILLE sistema de bloqueo rápido.
Flotación (longitudinal, lateral, diagonal)	35.4" x 9.9" x 36.8" / 90 cm x 25 cm x 93.4 cm
Condiciones de operación	100% continuo.
Alimentación CA: 100-250 Volts	Alimentación Directa de CA + batería de CD
Largo, ancho, alto	L = 92" / 234 cm; A = 30.3" / 77.2 cm; Alto = 28"- 43" / 71-109 cm
Trendelenburg	±25° (±20° con el kit de incremento de peso)
Movimiento lateral (ISO-ROLL™)	±15°
Ruedas y dirección	4 ruedas giratorias y retráctiles
Rieles laterales	Fijos a lo largo de 2/3 del tablero de la mesa
Tablero desmontable	Si, plataforma future-proof para uso prolongado y fácil transporte.
Manija para transporte	Si (Color: gris oscuro para versión de 225 kg, plateado para versión de 300 kg).

Personalizando la mesa imagiQ2™ para cubrir sus necesidades

Paquetes personalizados	Descripción
Paquete para mejora de movilidad	Cuando la mesa es transportada frecuentemente dentro de la clínica, use el paquete de mejora de movilidad. Con este paquete, todas las ruedas están diseñadas para girar y se incluye una quinta rueda para proporcionar una movilidad óptima. Ref: 535-1711
Kit para incremento de peso	Maximice la capacidad de carga de la mesa imagiQ2™ con el kit para incremento de peso de hasta 661 lb / 300 kg. Ref: 535-1710



Best Surgical Imaging Table



Stille AB Ekbacken 11, SE-644 30 Torshälla, Sweden
+46 8 588 580 00 • sales@stille.se • www.stille.se