



Surgical perfection. For life.



Healthcare  
& Pharmaceutical  
Awards 2019



Best Surgical Imaging Table


## Procedure in Tempi Ridotti e Limitata Esposizione alle Radiazioni

Il tavolo di imaging chirurgica STILLE imagiQ2™ rappresenta un importante avanzamento nello sviluppo della tecnologia a basso dosaggio, rendendo la sala operatoria un luogo ancora più sicuro per i pazienti e per l'intero team chirurgico.

### Aumentare l'efficienza e ridurre i tempi delle procedure

La tecnologia True Free Float™ di STILLE imagiQ2™ offre un controllo e una libertà di movimento senza precedenti in qualsiasi direzione desiderata fornendo allo stesso tempo fluidità all'avanguardia. Come un'estensione della mano del chirurgo, True Free Float™ aumenta l'efficacia in sala operatoria e riduce i tempi di procedura.

La tecnologia brevettata del movimento a culla ISO-ROLL™ ( $\pm 15^\circ$ ) permette di mantenere la messa a fuoco dell'immagine anche in posizione di rotazione laterale completa, minimizzando il riposizionamento del paziente e dell'arco a C, nonché riducendo le radiazioni disperse.

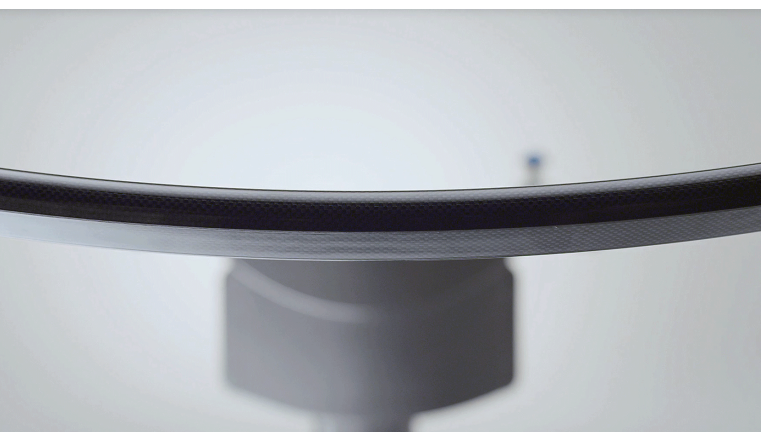

Piano del tavolo a basso dosaggio con bordi arrotondati e la più alta radiotrasparenza sul mercato tra i tavoli flottanti. Progettato per l'imaging obliquo, l'eliminazione degli artefatti d'immagine e una resa qualitativamente superiore



### Ridurre l'esposizione alle radiazioni e migliorare la qualità dell'immagine


L'esclusivo piano in fibra di carbonio ad alte prestazioni assicura una trasparenza imbattibile con equivalenza a 0.4 mm Al, consentendo all'arco a C di ridurre l'esposizione alle radiazioni senza compromettere la qualità dell'immagine. Fino al 60% in più di radiotrasparenza rispetto alla media dei tavoli sul mercato.

Il suo design ultrasottile, la base super bassa e le esclusive ruote retrattili (per tavoli flottanti), massimizzano l'accesso all'arco a C e consentono al ricevitore di immagini di avvicinarsi al paziente, riducendo così la dose di radiazioni e migliorando la qualità dell'immagine.

### Scegliere un Low-Dose Enabler™

Il suo design ultrasottile, la base super bassa e le ruote retrattili massimizzano l'accesso all'arco a C e consentono al ricevitore di immagini di avvicinarsi al paziente riducendo così l'esposizione alle radiazioni migliorando al contempo la qualità dell'immagine.

Per ulteriori informazioni: [www.stille.se/imagiq2](http://www.stille.se/imagiq2)

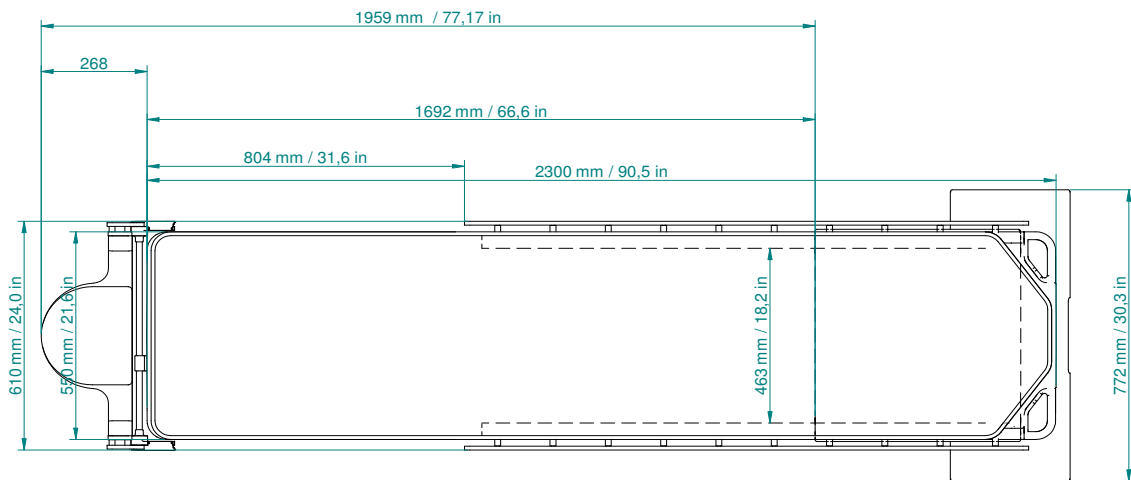

## Specifiche di prodotto STILLE imagiQ2™

Caratteristiche	Descrizione
Capacità di peso	225 kg (opzionale 300 kg con pacchetto potenziamento carico)
Lunghezza, profondità piano del tavolo	L= 230 cm ; W= 55 cm
Lunghezza radiotrasparenza	196 cm con poggiatesta (169.2 cm senza poggiatesta)
Piano del tavolo traslucido	Struttura in fibra di carbonio. Al 0.4 mm, Registrata
Galleggiante e blocco	STILLE True Free Float™ e STILLE Sistema blocco rapido
Galleggiante (longitudinale, laterale, diagonale)	90 cm x 25 cm x 93.4 cm
Condizioni di funzionamento	100% continue
Alimentazione CA: 100-250 Volt	Alimentazione diretta CA + alimentazione CC a batteria
Lunghezza, profondità, altezza	L = 234 cm; W = 77.2 cm; H = 71-109 cm
Trendelenburg	±25° (con pacchetto potenziamento carico ±20°)
Rotazione laterale (ISO-ROLL™)	±15°
Ruote e sterzata	4 ruote posteriori girevoli
Guide laterali	Fisse lungo 2/3 del piano del tavolo
Piano del tavolo sostituibile	Sì, piattaforma a prova di compatibilità futura per uso prolungato e trasporto agevole
Maniglia trasporto	Sì (Colore: grigio scuro per la versione 225 kg, argento per la versione 300 kg)

## Potenziamento imagiQ2™

Funzioni potenziamento	Descrizione
Pacchetto Miglioramento Mobilità	Quando il tavolo viene usato per frequenti trasporti all'interno della clinica, usare il pacchetto miglioramento per ottenere una migliore mobilità. Tutte le ruote sono progettate per ruotare e viene inclusa un'ulteriore quinta ruota per fornire la mobilità ottimale. Rif: 535-1711
Pacchetto Potenziamento Carico	Ottimizza le capacità dell'imagiQ2™ con pazienti di maggiore peso, capacità fino a 300 kg. Rif: 535-1710



Best Surgical Imaging Table



Stille AB Ekbacken 11, SE-644 30 Torshälla, Sweden  
+46 8 588 580 00 • sales@stille.se • www.stille.se