



- ✓ Tavolo flottante a basso dosaggio
- ✓ Bordi arrotondati
- ✓ Radiotrasparenza superiore

STILLE imagiQ2™ tavolo di imaging chirurgica

Procedure in Tempi Ridotti e Limitata Esposizione alle Radiazioni

STILLE imagiQ2™ rappresenta un importante avanzamento nello sviluppo della tecnologia a basso dosaggio, rendendo la sala operatoria un luogo ancora più sicuro per i pazienti e per l'intera équipe chirurgica.

Maggiore efficacia e riduzione dei tempi procedurali

La tecnologia True Free Float™ di STILLE imagiQ2™ offre un controllo e una libertà di movimento senza precedenti in qualsiasi direzione desiderata fornendo allo stesso tempo fluidità all'avanguardia. Come un'estensione della mano del chirurgo, True Free Float™ aumenta l'efficacia in sala operatoria e riduce i tempi di procedura.

La tecnologia brevettata del movimento a culla ISO-ROLL™ ($\pm 15^\circ$) permette di mantenere la messa a fuoco dell'immagine anche in posizione di rotazione laterale completa, minimizzando il riposizionamento del paziente e dell'Arco a C e riducendo le radiazioni disperse.



Progettato per l'imaging obliquo, l'eliminazione degli artefatti d'immagine e una resa qualitativamente superiore.

Ridurre le esposizioni alle radiazioni e migliorare la qualità d'immagine

L'esclusivo piano in fibra di carbonio ad alte prestazioni assicura una trasparenza imbattibile con equivalenza a 0,4 mm Al, consentendo all'Arco a C di ridurre l'esposizione alle radiazioni senza compromettere la qualità dell'immagine. Ciò equivale al 60% in più di radiotrasparenza rispetto ai tavoli presenti sul mercato.

Il suo design ultrasottile, la base super bassa e le esclusive ruote retrattili (per tavoli flottanti), massimizzano l'accesso all'Arco a C e consentono al ricevitore di immagini di avvicinarsi al paziente riducendo così la dose di radiazioni e migliorando la qualità d'immagine.


Scegliere un Low-Dose Enabler™

Il suo design ultrasottile, la base super bassa e le ruote retrattili massimizzano l'accesso all'Arco a C e consentono al ricevitore di immagini di avvicinarsi al paziente riducendo così l'esposizione alle radiazioni migliorando al contempo la qualità d'immagine.

Range di movimento*

Regolazione Altezza	71,0-109,0 cm
Trendelenburg	±20° (±25° opzionale)
Inclinazione laterale (ISO-ROLL™)	±15°
Flottazione longitudinale	90,0 cm
Flottazione laterale	25,0 cm
Flottazione diagonale	93,4 cm

* ± 2,0° tolleranza angoli
± 1,25 cm tolleranza lunghezze

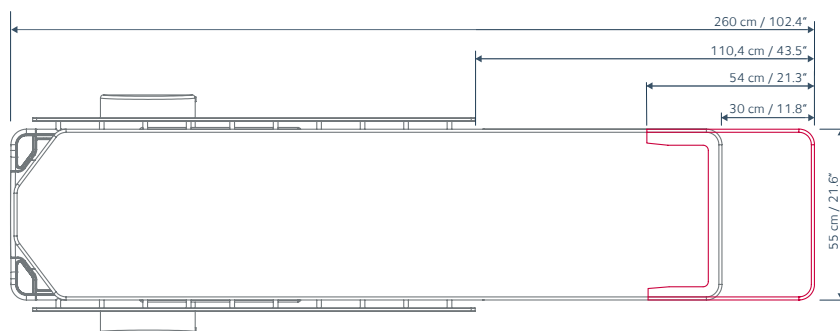

Specifiche di prodotto STILLE imagiQ2™

Capacità di peso	300 kg in qualsiasi posizione; anche decentrato.
Lunghezza, profondità piano del tavolo	L = 230 cm / 90,5" ; W = 55 cm / 21,6"
Lunghezza radiotrasparenza	199,2 cm / 89" con 3D poggiatesta (169,2 cm / 66,6" senza poggiatesta)
Piano del tavolo radiotrasparente	Struttura in fibra di carbonio. Al 0,4 mm, Registrata
Flottazione e blocco STILLE	True Free Float™ permette fluidi movimenti, e STILLE Sistema blocco rapido
Condizioni di funzionamento	100% continue
Alimentazione CA: 100-250 Volt	Alimentazione diretta CA + alimentazione CC a batteria
Lunghezza, profondità, altezza	L = 234 cm / 92"; W = 77,2 cm / 30,3"; H = 71-109 cm / 28"-43"
Ruote e meccanismo di sterzo	4 ruote girevoli
Guide laterali	Fisse, circa 142,5 cm / 56,1"
Piano del tavolo sostituibile	Sì, piattaforma a prova di compatibilità futura per uso prolungato e trasporto agevole
Maniglia trasporto	Sì, colore argento

Personalizzare imagiQ2 in base alle proprie esigenze

Pacchetto Potenziamento Mobilità (Rif: 535-1711) ▶ Se si prevede un frequente spostamento del tavolo all'interno della clinica è opportuno scegliere il pacchetto potenziamento mobilità. Alle quattro ruote girevoli viene inclusa una quinta ruota lineare per garantire una migliore mobilità.

Pacchetto Trendelenburg Aumentato (Ref: 535-1713) ▶ Scegliere questo pacchetto se si necessita un Trendelenburg di ±25° con una capacità di peso paziente pari a 225 kg e maniglie di trasporto color grigio. *Si prega notare che questa configurazione va specificata al momento dell'ordine di acquisto. Il pacchetto non può essere applicato ad unità già consegnate.*

STILLE AB

Ekbacken 11
644 30 Torshälla
Svezia

☎ +46 8 588 580 00
✉ sales@stille.se
🌐 www.stille.se

STILLE Surgical Inc.

840 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
USA

☎ +1 800 665 1614
✉ sales.us@stille.se
🌐 www.stille.se/us

Questi prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Si prega di contattare il rappresentante Stille per maggiori informazioni in merito alla disponibilità di mercato. Questo documento descrive correttamente il dispositivo al momento della stampa del documento. Si prega di fare sempre riferimento al manuale utente per eventuali modifiche del prodotto o istruzioni complete per l'uso. Questo documento è stato tradotto dall'inglese. In caso di incongruenza, prevarrà la versione inglese originale. Le immagini prodotte sono a scopo illustrativo e potrebbero non essere una rappresentazione fedele del prodotto.