



Surgical perfection. For life.



Healthcare
& Pharmaceutical
Awards 2019



Best Surgical Imaging Table


Proceduretijden verkorten en verminderen blootstelling aan straling

De STILLE imagiQ2™ chirurgische beeldtafel vertegenwoordigt een belangrijke vooruitgang in de ontwikkeling van "low-dose" technologie, en maakt zo de OK een nog veiligere plek voor patiënten en voor het chirurgisch team.

Verhoog de efficiëntie en verkort de proceduretijden

De True Free Float™-technologie van de STILLE imagiQ2™ geeft ongekeerde controle en bewegingsvrijheid in elke gewenste richting en werkt als een verlengstuk van de hand van de chirurg, waardoor kortere proceduretijden en hogere efficiëntie mogelijk zijn.

De gepatenteerde technologie van de ISO-ROLL™ beweging ($\pm 15^\circ$) helpt de beeldscherpte te behouden in volledige laterale rol, waardoor de nood aan patiënt en C-arm herpositionering tot een minimum worden beperkt. Deze technologie helpt eveneens de strooiingsstraling te verminderen.

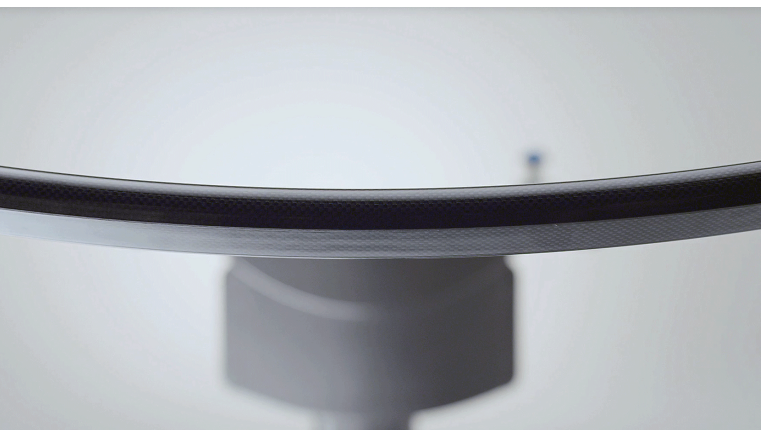

Lage dosis tafelblad met afgeronde hoeken en de hoogste radiolucentie ter wereld voor "zwevende" tafels. Speciaal ontworpen voor oblique of schuine beeldvorming en het elimineren van beeldartefacten terwijl het de beeldkwaliteit verbetert.



Verminder blootstelling aan straling en verbeter beeldkwaliteit


Het unieke hoogwaardige koolstofvezel tafelblad biedt een uitstekende radiolucentie van 0,4 mm Al equivalentie, waardoor de C-arm de straling kan verminderen zonder af te doen aan beeldkwaliteit. Dat is tot 60% meer radiolucent dan gemiddelde tafels op de markt.

Het ultradunne ontwerp en de zeer lage basis met intrekbare wielen, maximaliseren de C-arm toegang en laten de beeldontvanger dicht bij de patiënt komen, waardoor de stralingsdosis wordt verlaagd terwijl de beeldkwaliteit wordt verbeterd.

Kies een Low-Dose Enabler™

Alles bij elkaar genomen: de True Free Float™-technologie, uitstekende radiolucentie van het tafelblad en de intrekbare wielen, is wat de STILLE imagiQ2™ tot een echte Low-Dose Enabler™ maakt en daardoor de ideale C-arm aanvulling voor de mobiel Hybride OK of "office suite".

Lees meer op: www.stille.se/imagiQ2

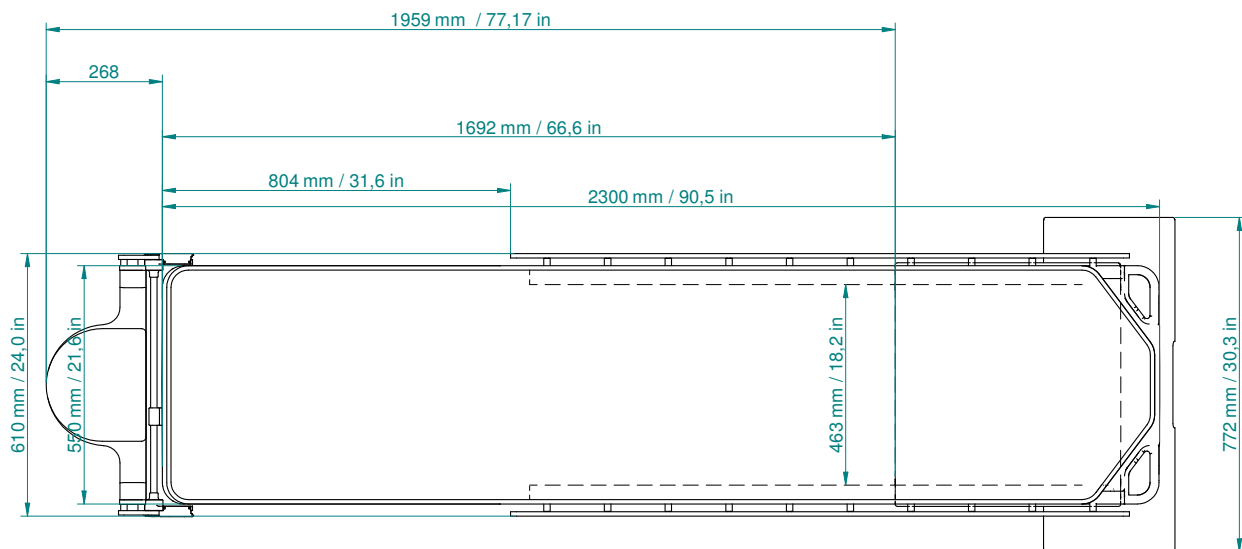

Productspecificaties van de STILLE imagiQ2™

Feature	Description
Toegelaten gewicht	225 kg (300 kg met gewichtsupgrade)
Tafelblad lengte en breedte	L= 230 cm ; B= 55 cm
Lengte radiolucente gedeelte	196 cm met hoofdsteun (169.2 cm zonder hoofdsteun)
Radiolucent tafelblad	Eigen carbonvezelstructuur. Al 0.4 mm
Float & vergrendeling	STILLE True Free Float™ en STILLE quick-lock systeem
Float (longitudinaal, lateraal, diagonaal)	90 cm x 25 cm x 93.4 cm
Werking	100% continu
AC stroom: 100-250 Volt	AC stroom + batterij DC stroom
Lengte, breedte, hoogte	L = 234 cm; B = 77.2 cm; H = 71-109 cm
Trendelenburg	±25° (met gewichts-upgrade pack ±20°)
Laterale roll (ISO-ROLL™)	±15°
Wielen	4 draaiende wielen
Side rails	Vast, 2/3 van het tafelblad
Afneembaar tafelblad	Ja, toekomstgericht en voor gemakkelijk transport.
Transport-handvat	Ja (Kleur: donker grijs voor de 225 kg-versie, zilver voor de 300 kg-versie)

De imagiQ2™ aanpassen aan uw behoeften

Upgrade	Description
Mobility Enhancement Pack	Wanneer de tafel wordt gebruikt voor frequent intra-klinisch transport, gebruik dan het mobiliteit uitbreidingspakket voor verbeterde mobiliteit. Alle wielen zijn ontworpen om te draaien en een extra vijfde wiel is inbegrepen voor optimale mobiliteit. Ref: 535-1711
Weight Upgrade Kit	Maximaliseer de mogelijkheden van de imagiQ2™ met een verhoogd draagvermogen tot 300 kg. Ref: 535-1710



Best Surgical Imaging Table



Stille AB Ekbacken 11, SE-644 30 Torshälla, Sweden
+46 8 588 580 00 • sales@stille.se • www.stille.se