



Surgical perfection. For life.

STILLE Medstone PM Elettrofisiologia/Colonna/Terapia del Dolore

Tavolo da Imaging Chirurgico Alta Qualità di Grado Ospedaliero capacità di peso 227 kg

I tavoli per arco a C STILLE Medstone contribuiscono a migliorare l'efficienza pur rappresentando una soluzione economica con qualità e affidabilità garantite dalla tecnologia svedese.


STILLE Medstone PM Tavoli da Imaging Chirurgico

Tavolo per arco a C -2, 3 e 5 movimenti-per elettrofisiologia, colonna, terapia del dolore e qualsiasi altra applicazione che richieda imaging di buona qualità, alte prestazioni, affidabilità e facilità d'uso a costi accessibili.

- Movimenti Motorizzati
- Capacità di peso 227 kg
- Piano in fibra di carbonio con <1mm Equivalenza Alluminio
- Posizionamento orizzontale e centrale predefinito automatico
- Quattro ruote bloccabili di grado ospedaliero per facilitare gli spostamenti
- Imaging metal free 147 cm
- 230 Vac, 3.4 A, 50 Hz e 120 Vac, 6.5A, 60 Hz con cavo di linea da 230Vac o 120Vac
- Materasso da 5 cm e 3 cinghie paziente
- Comando manuale via cavo

Opzioni Disponibili 2, 3 o 5 Movimenti Motorizzati:

- Regolazione Altezza
- Trendelenburg
- Inclinazione Laterale
- Scorrimento Longitudinale
- Scorrimento Laterale

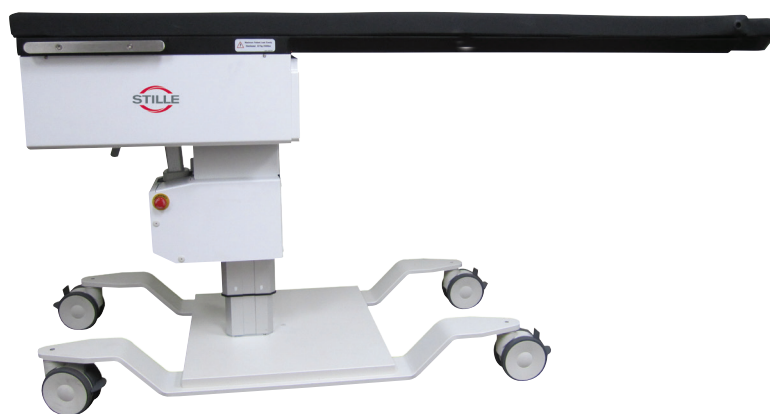

L'immagine mostra Medstone5 PM (500-1001)

| Modello | Medstone2 PM | Medstone3 PM | Medstone5 PM |
|--|-----------------|---------------|--------------|
| Codice | 500-1011 | 500-1006 | 500-1001 |
| Regolazione Altezza | 65,3 - 100,6 cm | 66,4-101,8 cm | 65,5-101 cm |
| Inclinazione laterale | ± 15° | ± 15° | ± 15° |
| Trendelenburg | x | ± 15° | ± 15° |
| Scorrimento longitudinale | x | x | 40 cm |
| Scorrimento laterale | x | x | 15 cm |
| Posizionamento orizzontale e centrale predefinito automatico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Covers controllo infettivo | x | x | ✓ |
| Piano di appoggio | A | A | B |

Tolleranza Specificazioni: ± 1°, ± 1,27 cm

A= Piano Tavolo Sagomato 56x208 cm con ritaglio facciale.

B= Uguale ad A più guide laterali lunghe 30.4 cm fissate al piano del tavolo

Piani Appoggio Disponibili




Piano di appoggio standard* sagomato con ritaglio facciale per il posizionamento prono del paziente con poggiabraccio opzionale 505-1112.

*Consigliato per Terapia del Dolore



Piano di appoggio rettangolare* (505-1101) senza ritaglio facciale con poggiabraccio opzionale 505-1112.

*Consigliato per Elettrofisiologia e Colonna

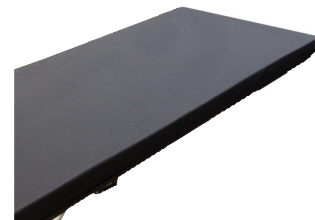

Piano di appoggio rettangolare extra largo* (505-1104) senza ritaglio facciale.

*Consigliato per ERCP o procedure con pazienti di grandi/ampie dimensioni o pazienti posizionati su un fianco

Accessori opzionali

| Part number | Description |
|---------------|---|
| 505-1179 | 2 staffe laterali removibili lunghe 80.5 cm per tutti i modelli con piano 56x208 cm ad esclusione dei modelli con piano tipo B |
| 505-1175 | 2 staffe laterali removibili lunghe 112.5 cm compatibili con il modello 500-1001 con piano 56x208 cm |
| 505-1181 | 2 staffe laterali removibili lunghe 80.5 cm per tutti i modelli con piano largo 66x208 cm |
| 514-50-3SR025 | Poggiabraccio regolabile universale con clamp (montante su staffe laterali) |
| 505-1112 | Poggiabraccio con cuscinetto e clamp per fissaggio diretto al piano del tavolo (non compatibile con il piano extra largo) |
| 505-1110 | Doppio poggiabraccio con cuscinetti; da posizionare sul piano del tavolo; non sono necessarie clamps o staffe laterali |
| 514-100401 | Asta per flebo con clamp (montante su staffa laterale) |
| 514-100311 | Arco per Anestesia con clamps (montante su staffe laterali) |
| 535-1773 | Sistema schermante anti RX blue, 5 pannelli connessi, fissaggio a staffe laterali o al piano del tavolo con strisce autoadesive* in Velcro® |
| 535-1772 | Sistema schermante anti RX grigio, 5 pannelli connessi, fissaggio a staffe laterali o al piano del tavolo con strisce autoadesive* in Velcro® |
| 535-1771 | Kit schermante anti RX blue, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro® |
| 535-1770 | Kit schermante anti RX grigio, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro® |
| 505-1140 | Controllo a pedale per Medstone2 PM |
| 505-1107 | Controllo a pedale per Medstone3 PM |
| 505-1109 | Comando a Pedale per Medstone5 PM |



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Sweden
Telefon: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
sales@stille.se

www.stille.se