




STILLE Medstone

Tables chirurgicales radiotransparentes

Une grande polyvalence pour un large panel d'interventions possibles

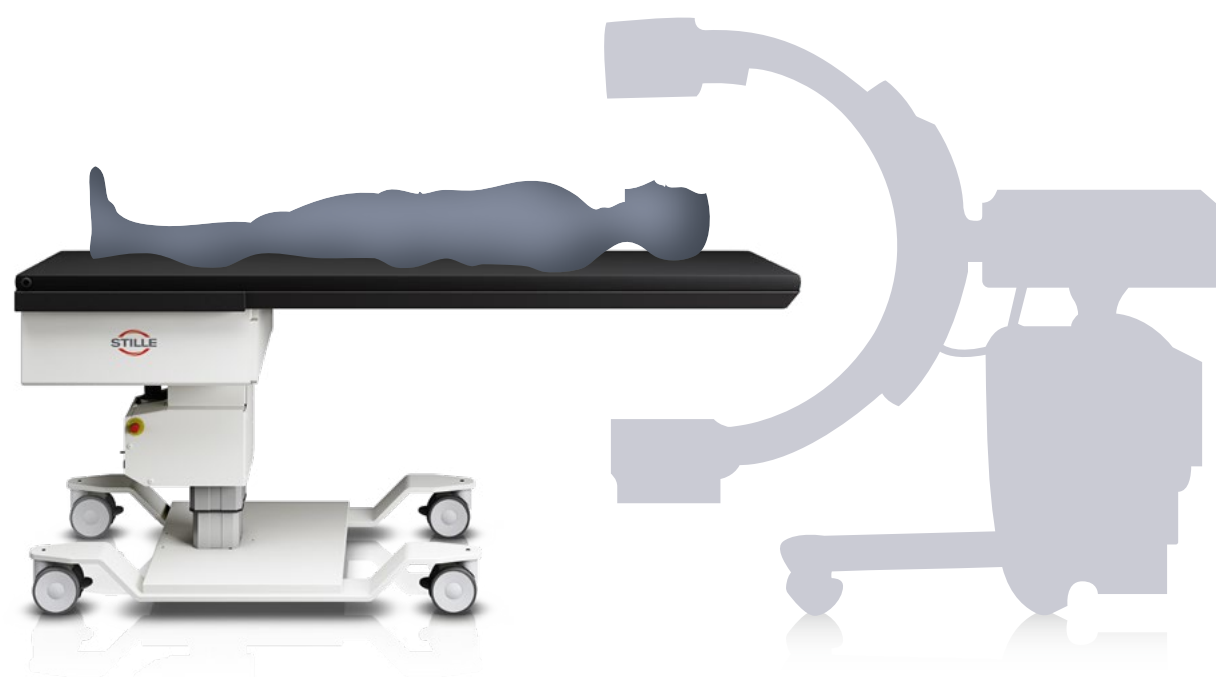

- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Bon rapport qualité/prix
- ✓ Grandes zones pour l'imagerie



DÉCUBITUS
DORSAL



DÉCUBITUS
VENTRAL



DÉCUBITUS-
LATÉRAL



DÉCUBITUS
VENTRAL
POUR RACHIS



DÉCLIVE



PROCLIVE

La large sélection de modèles Medstone permet de réaliser une grande variété de procédures. La qualité et la fiabilité de nos tables d'opération pour arceaux chirurgicaux participent à l'amélioration de l'efficacité des interventions, à un prix abordable.

Un choix varié de mouvements pour un positionnement précis du patient. Aussi bien motorisé qu'avec la technologie de plateau flottant manuel – le positionnement optimal du patient est assuré rapidement et de façon intuitive.

Jusqu'à 5 mouvements motorisés



Hauteur

Pour une bonne mobilité et faciliter le transfert du patient aussi bien que pour régler la hauteur de la table pour le confort de l'opérateur. Avec une élévation allant jusqu'à 1m80, le patient peut être placé au plus près du récepteur, améliorant ainsi la netteté de l'image.



Déclive / Proclive

Pour toutes les situations où la tête du patient doit être baissée ou levée.



Translations latérale et longitudinale

Les mouvements latéraux et longitudinaux motorisés permettent un positionnement précis, sans devoir bouger l'arceau, pour une imagerie par rayons X parfaite des régions d'intérêt.



Inclinaison latérale

Minimise la nécessité de repositionner l'arceau pendant les interventions.



Technologie Free Float™ de la Medstone3 CV

Apporte une complète liberté de mouvement dans le plan horizontal, même en diagonal, pour un contrôle total de la table. Cela permet d'avoir une excellente précision et de réduire la durée d'intervention. Idéale pour des techniques telles que le suivi de bolus de contraste en procédures endovasculaires (bolus chase).

Plus de 1000 tables utilisées à travers le monde

Les tables STILLE Medstone servent pour de multiples applications. Les utilisateurs apprécient leur intuitivité et leur facilité d'utilisation. Grâce à leur plateau en fibre de carbone, les tables Medstone contribuent à la qualité de l'image.



STILLE Medstone PM

- ▶ offre jusqu’à cinq mouvements motorisés
- ▶ différents plateaux disponibles : “contour” avec une découpe pour le visage des patients en décubitus ventral ou “rectangulaire” sans découpe pour les patients en décubitus dorsal
- ▶ pour tous les besoins : de la Medstone2 PM, modèle de base, à la Medstone5 PM, idéale pour les traitements plus complexes
- ▶ 227 kg de capacité de charge



- Contour :

 - ✓ Orthopédie
 - ✓ Traitement de la douleur
- Rectangulaire :

 - ✓ Rythmologie
 - ✓ Vasculaire périphérique
 - ✓ Vétérinaire
 - ✓ Multidisciplinaire

Configuration standard
matelas, trois sangles, télécommande filaire

	Medstone2 PM	Medstone3 PM	Medstone3 PM Rectangular	Medstone4 PM	Medstone5 PM
Référence	500-1011	500-1005	500-1043	500-1004	500-1001
Type de plateau	contour ⁽¹⁾	contour ⁽¹⁾	rectangulaire	contour ⁽¹⁾	contour ⁽¹⁾
Dimensions du plateau (cm)	56 x 208	56 x 208	56 x 208	56 x 208	56 x 208
Longueur utile pour l'imagerie 360° (cm)	147	147	147	147	147
Rails latéraux fixes (cm)	non	non	non	non	30,5
Couvercle antimicrobien	non	non	non	non	oui
Hauteur ⁽²⁾ (cm)	✓ 65,3 – 100,6	✓ 62,6 – 97,6	✓ 62,6 – 97,6	✓ 73,0 – 108,0	✓ 65,5 – 101,0
Déclive / Proclive ⁽³⁾ (± 15°)	✗	✓	✓	✓	✓
Inclinaison latérale ⁽³⁾ (± 15°)	✓	✗	✗	✓	✓
Translation longitudinale ⁽²⁾ (40 cm)	✗	✓	✓	✓	✓
Translation latérale ⁽²⁾ (15 cm)	✗	✗	✗	✗	✓

⁽¹⁾ avec cavité faciale

⁽²⁾ ± 1,25 cm de tolérance

⁽³⁾ ± 2,0° de tolérance

STILLE Medstone ERCP

- ▶ offre jusqu’à cinq mouvements motorisés
- ▶ idéale pour les interventions et examens avec patient en décubitus latéral et/ou patient souffrant d’obésité
- ▶ avec un plateau extra-large pour faciliter les fluoroscopies de l’abdomen et l’endoscopie
- ▶ 227 kg de capacité de charge



- ✓ Hépato-gastro-entérologie (notamment endoscopie)
- ✓ Chirurgie viscérale et digestive
- ✓ Orthopédie
- ✓ Toute chirurgie avec fluoroscopie

Configuration standard
matelas, trois sangles, télécommande filaire

	Medstone2 ERCP	Medstone3 ERCP	Medstone3 ERCP	Medstone5 ERCP
Référence	500-1041	500-1007	500-1044	500-1031
Type de plateau	large	large	large	large
Dimensions du plateau (cm)	66 x 208	66 x 208	66 x 208	66 x 208
Longueur utile pour l'imagerie 360° (cm)	147	147	147	147
Rails latéraux fixes (cm)	non	non	non	non
Couvercle antimicrobien	non	non	non	oui
Hauteur ⁽¹⁾ (cm)	✓ 66,5 – 101,9	✓ 63,5 – 98,8	✓ 63,9 – 98,9	✓ 67,0 – 102,0
Déclive / Proclive ⁽²⁾ (± 15°)	✗	✗	✓	✓
Inclinaison latérale ⁽²⁾ (± 15°)	✓	✗	✗	✓
Translation longitudinale ⁽¹⁾ (40 cm)	✗	✓	✓	✓
Translation latérale ⁽¹⁾ (15 cm)	✗	✓	✗	✓

⁽¹⁾ ± 1,25 cm de tolérance

⁽²⁾ ± 2,0° de tolérance

STILLE Medstone CV

- la table STILLE Medstone3 CV avec plateau flottant permet la liberté de mouvement, plus de rapidité et une précision parfaite, pour une imagerie des pieds à la tête
- la table STILLE Medstone3 CV inclut un bouton-poussoir “champignon” pour contrôler le plateau flottant, avec un système magnétique de blocage/déblocage, ainsi qu’un pédalier et une télécommande
- la table STILLE Medstone5 CV assure cinq mouvements motorisés dont le Trendelenburg
- 227 kg de capacité de charge



- ✓ Cardiovasculaire
- ✓ Endovasculaire
- ✓ Radiologie interventionnelle
- ✓ Rythmologie (Pacemaker, ...)
- ✓ Toute chirurgie avec fluoroscopie

Configuration standard
matelas, trois sangles, télécommande filaire ;
la Medstone3 CV inclut en plus un pédalier et un joystick

	Medstone3 CV	avec plateau flottant	Medstone5 CV
Référence	500-1025		500-1002
Type de plateau	rectangulaire		rectangulaire
Dimensions du plateau (cm)	61 x 208		56 x 208
Longueur utile pour l'imagerie 360° (cm)	76 ⁽¹⁾		147
Rails latéraux fixes (cm)	93,0		30,5
Couvercle antimicrobien	non		oui
Hauteur ⁽²⁾ (cm)	✓ 67,6 – 107,6		✓ 65,5 – 101,0
Déclive / Proclive ⁽³⁾ (± 15°)	✗		✓
Inclinaison latérale ⁽³⁾ (± 15°)	✗		✓
Translation longitudinale ⁽²⁾ (cm)	✓ 91,0		✓ 40,0
Translation latérale ⁽²⁾ (cm)	✓ 20,0		✓ 15,0

⁽¹⁾ longueur utile totale pour l'imagerie: 167 cm

⁽²⁾ ± 1,25 cm de tolérance

⁽³⁾ ± 2,0° de tolérance

Accessoires recommandés. Ici une sélection des accessoires les plus utilisés. Plus d'accessoires sont disponibles dans le catalogue dédié.

Accessoire	Caractéristique	Référence	Compatible avec
Bavolet de radio-protection en kit	gris bleu	535-1770 535-1771	tous les modèles tous les modèles
Bavolet de radio-protection à boucles	gris bleu	535-1772 535-1773	tous les modèles tous les modèles
Pédalier	5 mouvements 4 mouvements 3 mouvements	505-1109 505-1108 505-1139	Medstone5 PM / CV / ERCP Medstone4 PM Medstone3 ERCP (500-1007 seulement)
	3 mouvements	505-1138	Medstone3 PM / ERCP (500-1005 et -1044 seulement)
Rail amovible	2 x 80,5 cm, symétrique	505-1179	Medstone2, 3 et 4 PM (500-1004 seulement), Medstone3 CV
	2 x 80,5 cm, symétrique	505-1181	Medstone2 et 3 ERCP (500-1040 et -1044 seulement)
	2 x 112,5 cm, asymétrique 2 x 112,5 cm, asymétrique	505-1175 505-1177	Medstone PM, Medstone5 CV Medstone ERCP
Appui-bras	à attache rapide, radiotransparent	505-1111	tous les modèles
	spécial Fistule, radiotransparent	505-1118	tous les modèles sauf Medstone ERCP
	ajustable	514-50-3SR025	tous les modèles
Barrière de sécurité	escamotable, par paire	514-100530	Medstone ERCP
Plateau à cathéter	68,3 cm	505-1131	Medstone3 CV
Package d'accessoires	vascular, incl. 505-1179, 535-1772, 505-1118	505-1188	Medstone3 CV
	ERCP incl. 505-1181, 514-50-3SR025, 514-100530	505-1189	Medstone ERCP
	ERCP incl. 505-1181, 514-100530	505-1190	Medstone ERCP

Veuillez consulter le catalogue des accessoires pour plus de détails.

STILLE – Surgical perfection. For life.

STILLE est l'un des plus anciens fabricants au monde de dispositifs médicaux. À STILLE, nous développons, produisons et vendons des instruments de chirurgie ainsi que des tables d'opération et d'imagerie, premium, partout dans le monde depuis 180 ans. L'offre STILLE est portée par une marque forte et des produits reconnus pour leur qualité supérieure. Deux départements dédiés et spécialisés – Instruments de Chirurgie et, Tables d'Opération et d'Imagerie – sont à votre service pour vous guider.

Instrumentation chirurgicale

Nous proposons une offre complète d'instruments forgés et façonnés à la main qui répond aux besoins de toutes les spécialités de chirurgie, et tout particulièrement pour la chirurgie cardiovasculaire ainsi que pour la chirurgie plastique reconstructive et esthétique. La longévité des instruments STILLE, les lignes délicates de leur design et la sensation unique qu'ils procurent, font leur renommée mondiale.

Tables d'opération et d'imagerie

Avec des fonctionnalités adaptées, nos tables d'opération et d'imagerie sont spécialement conçues pour les interventions mini-invasives. Elles apportent une sécurité maximale que ce soit pour une prise en charge en hospitalisation conventionnelle ou, en ambulatoire. Les tables chirurgicales STILLE imagiQ2™ ont l'une des meilleures radiotransparences du marché et conviennent parfaitement à l'arsenal d'une Salle Hybride Mobile avancée tout comme à celui d'une salle interventionnelle ou classique. Les tables STILLE Medstone™ offrent une performance et une robustesse sans pareil à un prix abordable, dans le respect des hauts standards des technologies suédoises.

Plus d'informations sur : www.stille.se

STILLE AB

Ekbacken 11

644 30 Torshälla

Suède

☎ +46 8 588 580 00

✉ sales@stille.se

🌐 www.stille.se



Surgical perfection. For life.

Ces produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre représentant STILLE pour plus d'informations sur la disponibilité sur le marché.

Ce document décrit ces produits tels qu'ils sont au moment de l'impression. Veuillez toujours vous référer au manuel utilisateur pour tout amendement.

Ce document a été traduit de l'anglais. En cas d'incohérence, la version originale en anglais prévaut.

Les images des produits sont destinées à des fins d'illustration uniquement et ne sont pas nécessairement une représentation exacte des produits.