




STILLE Medstone

Tavoli di Imaging Chirurgica

Versatilità superiore

per una vasta gamma di
procedure interventistiche

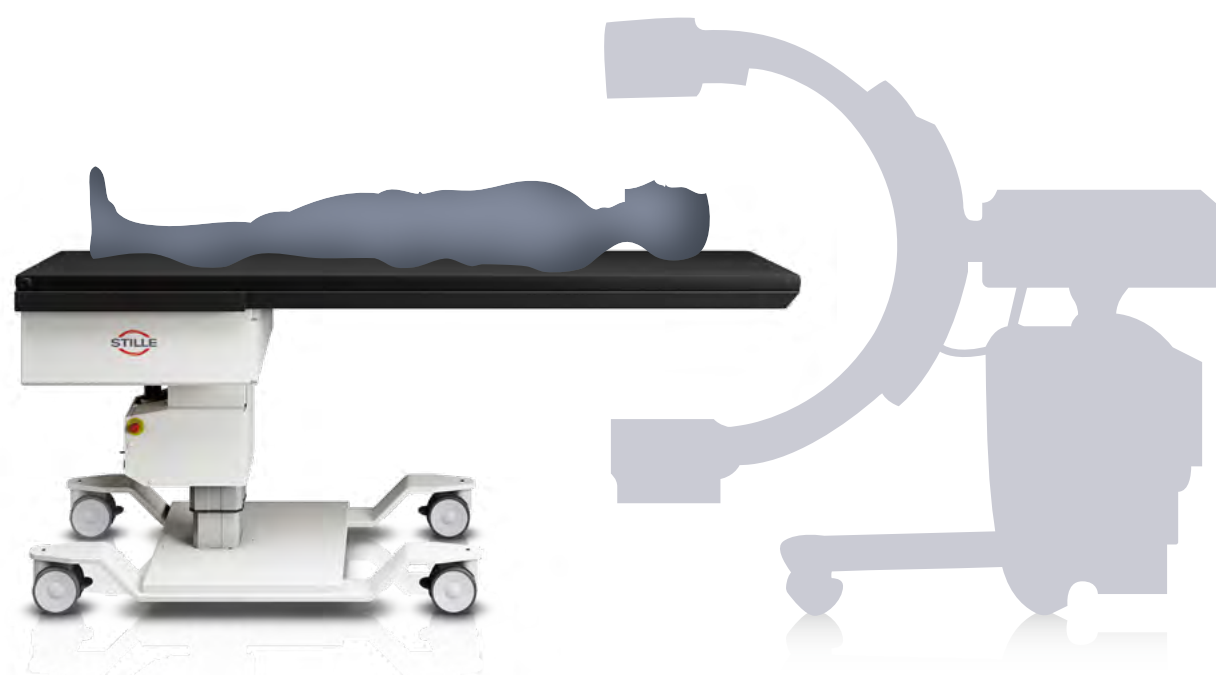

POSIZIONE
SUPINA



POSIZIONE
PRONA



POSIZIONE
LATERALE



POSIZIONE
SPINALE



POSIZIONE
TRENDELBURG



POSIZIONE
TRENDELBURG INVERSO

- ✓ Intuitivo e di facile utilizzo
- ✓ Qualità a prezzi accessibili
- ✓ Ampie aree di imaging

L'ampia selezione di modelli Medstone consente una vasta gamma di interventi chirurgici. La qualità e l'affidabilità dei nostri tavoli di imaging chirurgica per Arco a C contribuiscono a migliorare l'efficienza durante le procedure ad un prezzo economico.

Ampia gamma di movimenti per un posizionamento preciso del paziente.

Sia attraverso la funzione motorizzata che la libera flottazione – il posizionamento ottimale del paziente è garantito in modo intuitivo e veloce.

Fino a cinque movimenti motorizzati disponibili



Regolazione in altezza

Per una facile transizione e mobilità del paziente nonché regolazione in base all'altezza del medico. Con un'elevazione fino a 108 cm, il tavolo permette di posizionare il paziente vicino al recettore d'immagine il che aumenta la qualità dell'immagine.



Trendelenburg

In situazioni in cui la testa del paziente deve essere sollevata o abbassata.



Scorrimento longitudinale e laterale

Il movimento motorizzato consente un posizionamento longitudinale e laterale preciso per l'imaging a raggi X pertanto l'Arco a C non deve essere spostato per catturare l'anatomia di interesse.



Inclinazione laterale

Minimizza la necessità di riposizionamento dell'Arco C durante le procedure.



Tecnologia Free Float™ con Medstone3 CV

Consente una completa libertà di movimento orizzontalmente e diagonalmente, per una maggiore affidabilità e controllo quando si utilizza il tavolo. Ciò consente una precisione eccellente e la riduzione del tempo di procedura. Ideale durante le procedure endovascolari con mezzo di contrasto (visualizzazione in tempo reale del bolo di contrasto).

Oltre 1.000 unità vendute in tutto il mondo

**I tavoli Medstone STILLE sono
affidabili su molteplici applicazioni.**

I clienti apprezzano il funzionamento intuitivo e la facilità d'utilizzo. In combinazione con il piano del tavolo in fibra di carbonio, i tavoli Medstone offrono un'elevata qualità dell'immagine.



STILLE Medstone PM

- ▶ offre fino a cinque movimenti motorizzati
- ▶ disponibile con diversi piani: sagomati con ritaglio facciale per il posizionamento prono del paziente e rettangolare senza un ritaglio facciale per il posizionamento supino
- ▶ per ogni richiesta: Medstone2 PM è il modello base, mentre Medstone5 PM è ideale per trattamenti complessi
- ▶ 227 kg di capacità di peso

Configurazione standard
materasso, tre cinghie paziente,
controllo manuale



- Sagomato:

 - ✓ Ortopedia
 - ✓ Terapia del dolore
- Rettangolare:

 - ✓ Elettrofisiologia
 - ✓ Vascolare periferico
 - ✓ Veterinaria
 - ✓ Multidisciplinare

	Medstone2 PM	Medstone3 PM	Medstone3 PM Rectangular	Medstone4 PM	Medstone5 PM
Codice	500-1011	500-1005	500-1043	500-1004	500-1001
Tipo piano tavolo	sagomato ⁽¹⁾	sagomato ⁽¹⁾	rettangolare	sagomato ⁽¹⁾	sagomato ⁽¹⁾
Misure piano tavolo (cm)	56 x 208	56 x 208	56 x 208	56 x 208	56 x 208
360° lunghezza dell'immagine (cm)	147	147	147	147	147
Giuda laterale fissa (cm)	no	no	no	no	30.5
Coperture di controllo infettivo	no	no	no	no	sì
Regolazione in altezza ⁽²⁾ (cm)	✓ 65.3 – 100.6	✓ 62.6 – 97.6	✓ 62.6 – 97.6	✓ 73.0 – 108.0	✓ 65.5 – 101.0
Trendelenburg ⁽³⁾ (± 15°)	✗	✓	✓	✓	✓
Inclinazione laterale ⁽³⁾ (± 15°)	✓	✗	✗	✓	✓
Corsa longitudinale ⁽²⁾ (40 cm)	✗	✓	✓	✓	✓
Corsa laterale ⁽²⁾ (15 cm)	✗	✗	✗	✗	✓

⁽¹⁾ con ritaglio facciale

⁽²⁾ tolleranza ±1.25 cm

⁽³⁾ tolleranza ± 2.0°

STILLE Medstone ERCP

- ▶ offre fino a cinque movimenti motorizzati
- ▶ ideale per le procedure con i pazienti in posizione laterale e/o per i pazienti più grandi
- ▶ viene fornito con un piano operatorio extra largo per facilitare facilmente la fluoroscopia addominale e le procedure endoscopiche
- ▶ 227 kg di capacità di peso

Configurazione standard
materasso, tre cinghie paziente,
controllo manuale



- ✓ Addominale
- ✓ Gastroenterologia
- ✓ Broncoscopia
- ✓ Ortopedia
- ✓ Procedure fluoroscopiche

	Medstone2 ERCP	Medstone3 ERCP	Medstone3 ERCP	Medstone5 ERCP
Codice	500-1041	500-1007	500-1044	500-1031
Tipo piano tavolo	largo	largo	largo	largo
Misure piano tavolo (cm)	66 x 208	66 x 208	66 x 208	66 x 208
360° lunghezza dell'immagine (cm)	147	147	147	147
Giuda laterale fissa (cm)	no	no	no	no
Coperture di controllo infettivo	no	no	no	sì
Regolazione in altezza ⁽¹⁾ (cm)	✓ 66.5 – 101.9	✓ 63.5 – 98.8	✓ 63.9 – 98.9	✓ 67.0 – 102.0
Trendelenburg ⁽²⁾ (± 15°)	✗	✗	✓	✓
Inclinazione laterale ⁽²⁾ (± 15°)	✓	✗	✗	✓
Corsa longitudinale ⁽¹⁾ (40 cm)	✗	✓	✓	✓
Corsa laterale ⁽¹⁾ (15 cm)	✗	✓	✗	✓

⁽¹⁾ tolleranza ±1.25 cm

⁽²⁾ tolleranza ± 2.0°

STILLE Medstone CV

- ▶ il tavolo STILLE Medstone3 CV con piano flottante per immagine testa piedi con precisione, velocità e libertà di movimento
- ▶ STILLE Medstone3 CV è dotato di una unità di controllo di flottazione con blocco a rilascio magnetico oltre ai sistemi di controllo manuale e a pedale
- ▶ con il tavolo STILLE Medstone5 CV, la serie offre cinque movimenti motorizzati, incluso Trendelenburg
- ▶ capacità di peso 227 kg

Configurazione standard
materasso, tre cinghie paziente, controllo manuale;
Medstone3 CV include anche un controllo a pedale e una maniglia di flottazione.



- ✓ Cardiovascolare
- ✓ Endovascolare
- ✓ Vascolare
- ✓ Radiologia Interventistica
- ✓ Elettrofisiologia (Pacemaker, ...)
- ✓ Procedure fluoroscopiche

	Medstone3 CV	Medstone5 CV
	500-1025	500-1002
Codice	500-1025	500-1002
Tipo piano tavolo	rettangolare	rettangolare
Misure piano tavolo (cm)	61 x 208	56 x 208
360° lunghezza dell'immagine (cm)	76 ⁽¹⁾	147
Guide laterali fisse (cm)	93.0	30.5
Coperture di controllo infettivo	non	oui
Regolazione in altezza ⁽²⁾ (cm)	✓ 67.6 – 107.6	✓ 65.5 – 101.0
Trendelenburg ⁽³⁾ (± 15°)	✗	✓
Inclinazione laterale ⁽³⁾ (± 15°)	✗	✓
Corsa longitudinale ⁽²⁾ (cm)	✓ 91.0	✓ 40.0
Corsa laterale ⁽²⁾ (cm)	✓ 20.0	✓ 15.0

⁽¹⁾ lunghezza totale di immagine: 167 cm
⁽²⁾ tolleranza ± 1.25 cm
⁽³⁾ tolleranza ± 2.0°

Accessori raccomandati. Di seguito una selezione estratta dall'ampia gamma di accessori disponibili. La seguente è solo una selezione di una più ampia offerta.

Accessori	Tipo	Codice	Compatibile con
Kit protezione anti raggi X	grigio blue	535-1770 535-1771	tutti i modelli tutti i modelli
Loop protezione anti raggi X	grigio bleu	535-1772 535-1773	tutti i modelli tutti i modelli
Controllo a pedale	5-movimenti 4-movimenti 3-movimenti 3-movimenti	505-1109 505-1108 505-1139 505-1138	Medstone5 PM/CV/ERCP Medstone4 PM Medstone3 ERCP (soltanto 500-1007) Medstone3 PM/ERCP (soltanto 500-1005 e -1044)
Guide laterali removibili	2 x 80.5 cm, simmetriche 2 x 80.5 cm, simmetriche 2 x 112.5 cm, non-simmetriche 2 x 112.5 cm, non-simmetriche	505-1179 505-1181 505-1175 505-1177	Medstone2, 3 et 4 PM (soltanto 500-1004), Medstone3 CV Medstone2 et 3 ERCP (soltanto 500-1040 e -1044) Medstone PM, Medstone5 CV Medstone ERCP
Reggibraccio	reggibraccio a scatto reggibraccio per fistola radio-trasparente reggibraccio regolabile	505-1111 505-1118 514-50-3SR025	tutti i modelli tutti i modelli escl. Medstone ERCP tutti i modelli
Sponde laterali	pieghevole, coppia	514-100530	Medstone ERCP
Vassoio catetere	68.3 cm	505-1131	Medstone3 CV
Pacchetto Accessori	vascolare, incl. 505-1179, 535-1772, 505-1118 ERCP incl. 505-1181, 514-50-3SR025, 514-100530 ERCP incl. 505-1181, 514-100530	505-1188 505-1189 505-1190	Medstone3 CV Medstone ERCP Medstone ERCP

Per lista completa consultare la brochure accessori.

STILLE – Surgical perfection. For life.

STILLE è una delle più antiche aziende di dispositivi medici al mondo. In STILLE, sviluppiamo, produciamo e vendiamo strumenti chirurgici di alta qualità e tavoli di imaging chirurgico a medici di tutto il mondo, e lo facciamo da 180 anni.

L'offerta di STILLE consiste in un marchio forte e prodotti rinomati per la loro qualità superiore. Gestiamo la nostra attività in due aree di attività distinte – Strumenti Chirurgici e Tavoli di Imaging Chirurgico.

Strumenti Chirurgici

Nella nostra area di attività Strumenti Chirurgici, abbiamo un'offerta completa di strumentazione artigianale forgiata per tutti i settori della chirurgia open, con particolare attenzione alla chirurgia cardiovascolare e alla chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. I nostri strumenti sono caratterizzati da design delicato, resistenza all'avanguardia e una

sensazione tattile unica, che ha reso STILLE un fornitore ben noto e molto rispettato dai chirurghi di tutto il mondo.

Tavoli di imaging chirurgica

Nella nostra area business Tavoli per imaging chirurgico, offriamo speciali tavoli per procedure minimamente invasive, con prezzi, sicurezza e funzionalità ottimizzate, sia per ambienti interni che ambulatoriali. STILLE Medstone tavoli di imaging chirurgico mobili, contibuiscono a migliorare l'efficienza in sala operatoria, rappresentando una soluzione affidabile e di qualità ad un costo accessibile.

Scopri di più su: **www.stille.se**

STILLE AB

Ekbacken 11

644 30 Torshälla

Svezia

☎ +46 8 588 580 00

✉ sales@stille.se

🌐 **www.stille.se**



Surgical perfection. For life.

Questi prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni. Si prega di contattare il rappresentante STILLE per maggiori informazioni sulla disponibilità di mercato.

Questo documento descrive correttamente i dispositivi al momento in cui il documento è stato stampato. Si prega di fare sempre riferimento al manuale utente per eventuali modifiche del prodotto. Questo documento è stato tradotto dall'inglese. In caso di incongruenza, prevale la versione inglese originale.

Le immagini dei prodotti mostrate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere una rappresentazione esatta del prodotto.