



Surgical perfection. For life.



# STILLE imagiQ3™ Legacy

## Zubehörkatalog



# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Vorstellung</b>	04
<b>Tischkonfiguration</b>	06
<b>Zubehörpakete</b>	08
<b>Abnehmbare Seitenschienen</b>	10
<b>Anästhesiezubehör</b>	12
Infusionsstange	12
Anästhesiebogen	12
<b>Arm-, Bein- und Fußstützen</b>	14
Armauflagen	14
Arm- und Beinstützen	16
Beinhalter	17
Fußstützen	18
Schienbeinstütze	18
<b>Steuergeräte</b>	20
Zusätzlicher Schwenkgriff	20
<b>Allgemeine Körperstützen und Halterungen</b>	22
Lateral-/ Seitenstützen	22
Seitenschutzgitter	23
Patienten-/ Beingurte	23
<b>Kopfstützen</b>	24
<b>Strahlenschutz</b>	26
<b>Erweiterungen für chirurgische Tische</b>	28
Katheterablagen	28
Instrumentenablage	29
Verbreiterungselemente	29
<b>Index</b>	30

---

Das Zubehör für imagiQ3™ Legacy Operations-tische bietet eine breite Palette an Lösungen für Verfahren wie Gefäßchirurgie, Elektrophysiologie, Schmerztherapie, Wirbelsäulenchirurgie und ERCP.

## Wie navigiert man durch unseren Katalog?

Alle STILLE Medstone-Zubehörteile sind in einem Dokument zusammengefasst und werden einzeln präsentiert, wie unten dargestellt.

Seite | SORTIMENT - ARTIKELKATEGORIE

ARTIKELKATEGORIE

Produktname oder spezifische(s) Merkmal(e)

Beschreibung des Artikels: Verwendung, Eigen-schaften, Schnellmontageanleitung, Material usw.

✓ **Enthalten:**  
Teile und Nummern, die sich auf den Artikel beziehen

! **Erforderlich:**  
Sonstiges Zubehör, das für die Montage oder Verwendung des Artikels benötigt wird

+ **Optional:**  
Alternative oder Vorschlag zur Kombination von Teilen für einen reibungsloseren Arbeitsablauf oder eine optimale Nutzung



Bestellinformationen

EU: XX-XX-XXXX  
USA: XX-XX-XXXX

**Artikelnummer\*** des Artikels für Ihre Bestellung.  
Die Teilenummer kann je nach Region unter-schiedlich sein. In den meisten Regionen außerhalb der USA wird die EU-Version verwendet. Die Produkte sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihre STILLE-Vertretung, um weitere Informationen über die Marktverfügbarkeit zu erhalten.

\* Für die Suche nach Artikelnummern genügt ein Blick in den Index am Ende des Katalogs.

## TISCHKONFIGURATION

### imagiQ3™ Legacy Standardkonfiguration

Ein mobiler und hochgradig röntgendurchlässiger Operationstisch mit dem patentierten True Free™. Dieser Low-Dose Enabler™ optimiert die Nutzung von C- und O-Bögen, reduziert die Streustrahlung und verbessert die Bildqualität.



#### Bestellinformation

##### imagiQ3™ Legacy

- EU, bis zu 5 Tage Batterieautonomie\* (2-Batterien-System): 550-1702
- EU, bis zu 10 Tage Batterieautonomie\* (3-Batterien-System): 550-1703

\* Autonomie bei normaler Nutzung

#### Enthalten:

- 1x „Slow Recovery“-Matratze
  - 1x Schwenkgriff für die schwebende Tischplatte
  - 1x Kabelgebundene Handsteuerung
  - 1x Ersatzhandsteuerung
  - 1x Notfall-Trendelenburg-Steuerung
  - 2x Fixe EU/DIN Seitenschienen, Länge je 142,5 cm
  - 2x Ergonomische Transportgriffe
  - 4x Einziehbare und schwenkbare Räder
  - 1x Netzkabel
- Lithium-Ionen-Akkus:
- 2x für 550-1702
  - 3x für 550-1703

## ZUBEHÖRPAKETE



Gefäßchirurgie

### imagiQ3 Premiumpaket Gefäßchirurgie (USA)

Ein komplettes kardiovaskuläres Behandlungspaket mit dem Zubehör für die Verwendung mit imagiQ3 Legacy. Auch ohne Katheterablage erhältlich: imagiQ3 imagiQ3 Basispaket Gefäßchirurgie (USA). Nur in den USA als Paket erhältlich; Artikel können auch einzeln bestellt werden.

**✓ Enthalten:**

- Eine abnehmbare lange Seitenschiene
- Eine abnehmbare kurze Seitenschiene
- Eine strahlendurchlässige Armauflage mit Polster
- Ein Strahlenschutzvorhang (graue Version)
- Ein Patientengurt
- Eine 1 m lange Katheterablage

**! Erforderlich:**

- 

**+ Optional:**

- 

Bestellinformationen

**EU:** Nicht verfügbar

**USA:** 555-1791 (Premium)

555-1790 (Basis, ohne Katheterablage)

**✓ Lieferumfang**

**Abnehmbare Seitenschiene (80,5 cm, ein Stück)**

Seite 10

**EU:** 535-1721

**USA:** 535-1720

**Kurze Seitenschiene (28,5 cm, ein Stück)**

Seite 11

**EU:** 535-1725

**USA:** 535-1724

**Strahlendurchlässige Armauflage - Seite 14**

**EU:** 535-1730

**USA:** 535-1730

**Deluxe-Maximum-Gurt**

Seite 23

**EU:** Alternative 514-100465

**USA:** O-RSX2

**Strahlenschutzvorhang grau - Seite 26**

**EU:** 535-1772


**USA:** 535-1772

**Katheterablage 1.000 mm**

Seite 28

**EU:** 555-1750

**USA:** 555-1750

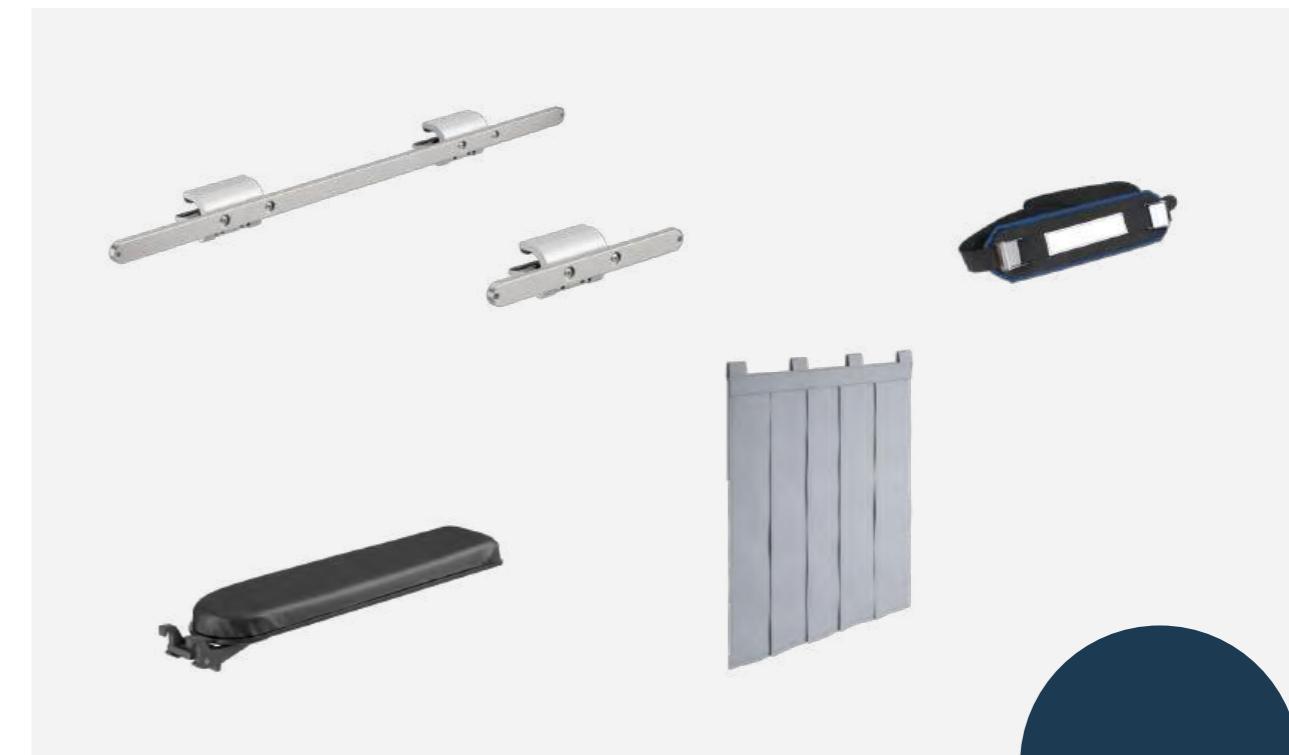

Multidisziplinär

### imagiQ3 Basis Zubehörpaket (USA)

Ein multidisziplinäres Behandlungspaket mit grundlegendem Zubehör für die Verwendung mit imagiQ3 Legacy. Nur in den USA als Paket erhältlich; Artikel können einzeln bestellt werden.

**✓ Enthalten:**

- Eine abnehmbare lange Seitenschiene
- Eine abnehmbare kurze Seitenschiene
- Eine einfache Armauflage mit 5 cm Polster
- Ein Strahlenschutzvorhang (graue Version)
- Ein Patientengurt

**! Erforderlich:**

- 

**+ Optional:**

- 

Bestellinformationen

**EU:** Nicht verfügbar

**USA:** 555-1793

**✓ Lieferumfang**

**Abnehmbare Seitenschiene (80,5 cm, ein Stück)**

Seite 10

**EU:** 535-1721

**USA:** 535-1720

**Kurze Seitenschiene (28,5 cm, ein Stück)**

Seite 11

**EU:** 535-1725

**USA:** 535-1724

**Armauflage Basic**

Seite 15

**EU:** Nicht verfügbar

**USA:** 512-5000

**Deluxe-Maximum-Gurt**

Seite 23

**EU:** Alternative 514-100465

**USA:** O-RSX2

**Strahlenschutzvorhang grau - Seite 26**

**EU:** 535-1772

**USA:** 535-1772

## ABNEHMBARE SEITENSCHIENEN

### Seitenschiene (70,0 cm, ein Stück)

Die am häufigsten gewählte abnehmbare Seitenschiene zur Montage von Zubehör.  
Nicht kompatibel mit der 3D-Kopfstütze.

**Enthalten:**


Eine Seitenschiene

**Erforderlich:**

-

**Optional:**

-

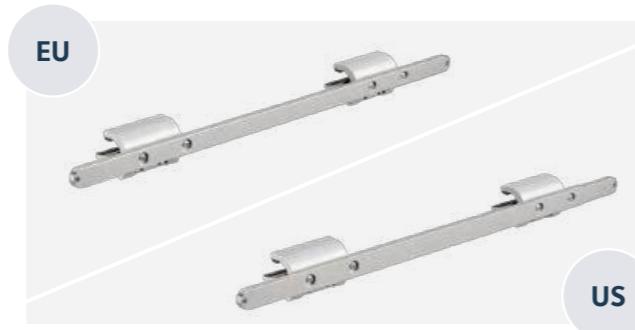

Bestellinformationen

EU: 535-1729

USA: 535-1723

### Seitenschiene, kurz (28,5 cm, ein Stück)

Abnehmbare Seitenschiene mit 1 Klemme zur Befestigung von leichtem Zubehör (max. 5 kg, z. B. Schwenkgriff oder Infusionsstange). Kann am freien Ende des imagiQ3 Legacy montiert werden. Nicht mit einem Retraktorsystem kompatibel.

**Enthalten:**


Eine Seitenschiene

**Erforderlich:**

-

**Optional:**

-

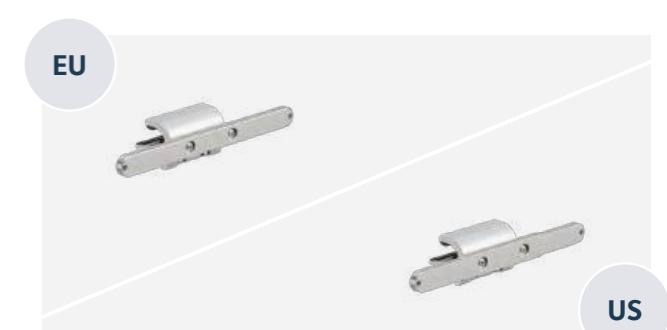

Bestellinformationen

EU: 535-1725

USA: 535-1724

### Abnehmbare Seitenschiene (80,5 cm, ein Stück)

Seitenschiene für die volle Tischlänge des imagiQ3 Legacy. Bestellen Sie zwei Stück für die Montage der festen Kopfstütze.

Nicht kompatibel mit der 3D-Kopfstütze und der verstellbaren Kopfstütze.

**Enthalten:**


Eine Seitenschiene

**Erforderlich:**

-

**Optional:**

-

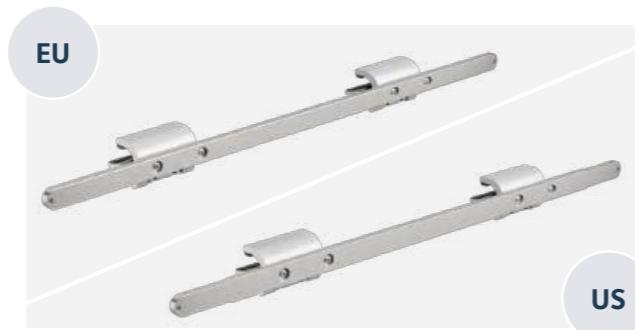

Bestellinformationen

EU: 535-1721

USA: 535-1720

## ANÄSTHESIEZUBEHÖR

### Infusionsstange

Infusionsstange mit drei Haken zur Befestigung an Seitenschiene. Die Höhe ist einstellbar. Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Aluminium.



**✓ Enthalten:**  
Eine Infusionsstange  
mit einer nicht abnehmbaren Klemme

Bestellinformationen

**EU:** 514-100401  
**USA:** 514-100401-US

**! Erforderlich:**  
Feste oder abnehmbare Seitenschiene

**+ Optional:**



### Anästhesiebogen

Ermöglicht das Aufhängen von Tüchern oder gleichwertigem Material, um den sterilen Bereich vom unsterilen Bereich zu trennen. Hergestellt aus rostfreiem Stahl und Aluminium mit Polyurethanbeschichtung.



**✓ Enthalten:**  
Ein flexibler Rahmen  
mit zwei nicht abnehmbaren Klemmen

Bestellinformationen

**EU:** 514-100311  
**USA:** 514-100311-US

**! Erforderlich:**  
Feste oder abnehmbare Seitenschienen

**+ Optional:**

imagiQ3 Legacy-Tisch mit zwei 70 cm langen Seitenschienen, Infusionsstange, Anästhesiebogen, verstellbarer Armauflage, verstellbarer Kopfstütze und Strahlenschutzvorhang.

\* Produkte sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.  
Für weitere Informationen zur Marktverfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren STILLE-Vertreter.

## ARM-, BEIN UND FUSSSTÜTZEN

### Verstellbare Armauflage

Diese Armauflage wurde entwickelt, um den Arm eines Patienten zu stützen; und sie ist ideal für Infusionen. Sie ist sehr einfach mit einer Hand in jede gewünschte Position zu bringen. Diese Armauflage ist nicht strahlendurchlässig.

- ✓ Enthalten:**  
Eine Armauflage mit einer nicht abnehmbaren Klemme und einem antistatischen Polster
- ! Erforderlich:**  
Feste oder abnehmbare Seitenschiene mit 2 Klemmen
- + Optional:**  
-



#### Bestellinformationen

**EU:** 514-50-3SR025  
**USA:** 514-50-3SR027

### Armauflage Basic (USA)

Strahlendurchlässige Armauflage einfacher Ausführung. Nur in den USA erhältlich

- ✓ Enthalten:**  
Eine Auflage mit Klemme und Polster
- ! Erforderlich:**  
Feste oder abnehmbare Seitenschiene mit 2 Klemmen
- + Optional:**  
-



#### Bestellinformationen

**EU:** Nicht verfügbar  
**USA:** 512-5000

### Strahlendurchlässige Armauflage

Eine nicht verstellbare, strahlendurchlässige Armauflage zur Unterstützung des Patientenarms während der Bildgebung, um eine ungehinderte Bildgebung zu gewährleisten. Die Armauflage ist 81,1 cm lang und 35,0 cm breit.

- ✓ Enthalten:**  
Eine strahlendurchlässige Platte mit Polster und zwei Klemmen
- ! Erforderlich:**  
-
- + Optional:**  
-



#### Bestellinformationen

**EU:** 535-1730  
**USA:** 535-1730



imagiQ3 Legacy-Tisch mit 70 cm langer Seitenschiene, verstellbarer Armauflage und Strahlenschutzvorhang\*.

\* Produkte sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.  
Für weitere Informationen zur Marktverfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren STILLE-Vertreter.

## Arm- und Beinhalter, gebogen

Dient zur Unterstützung und Fixierung des Arms/Beins des Patienten auf dem Tisch während der Operation und des Transports. Die Kurve biegt sich 5,3 cm nach außen (d. h. orthogonaler Abstand zwischen dem Wendepunkt der Kurve und der Matratze).

**✓ Enthalten:**

Ein Stück gebogene Schutzvorrichtung

**! Erforderlich:**

-

**+ Optional:**

Bezug für Arm- und Beinhalter, gebogen

EU/USA: 514-100553



Bestellinformationen

EU: 514-100552

USA: 514-100552

## Arm- und Beinhalter, gerade

Dient zur Unterstützung und Fixierung des Arms/Beins des Patienten auf dem Tisch während der Operation und des Transports. Der Halter wird unter die Matratze geschoben.

**✓ Enthalten:**

Ein Stück Schutzvorrichtung


**! Erforderlich:**

-

**+ Optional:**

Bezug für Arm- und Beinhalter, gerade

EU/USA: 514-100555

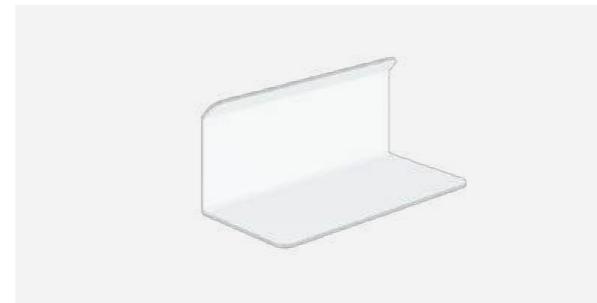

Bestellinformationen

EU: 514-100554

USA: 514-100554

## Beinhalter mit Klemmen (Paar)

Beinstützen zur Unterstützung und Positionierung der Unterschenkel des Patienten während der Operation.

**✓ Enthalten:**

Zwei Beinhalter mit Klemmen und Polstern

**! Erforderlich:**

Feste oder abnehmbare Seitenschienen mit 2 Klemmen

**+ Optional:**

-



Bestellinformationen

EU: 514-50-3SR032

USA: 514-50-3SR033



imagiQ3 Legacy Tisch mit 3D-Kopfstütze, gebogenem Arm- und Beinschutz und Strahlenschutzvorhang (graue Version)\*.

\* Produkte sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Für weitere Informationen zur Marktverfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren STILLE-Vertreter.


## Fußstützen (Paar)

Die Fußstützen bieten Patienten Stabilität, insbesondere während der Anti-Trendelenburg-Lagerung. Sie lassen sich in der Höhe und entlang des Operationstisches verstellen, um Patienten unterschiedlicher Größe gerecht zu werden.

**✓ Enthalten:**  
Zwei Stützen, Polster und Klemmen

**! Erforderlich:**  
Feste oder abnehmbare Seitenschiene mit 2 Klemmen

**+ Optional:**  
-

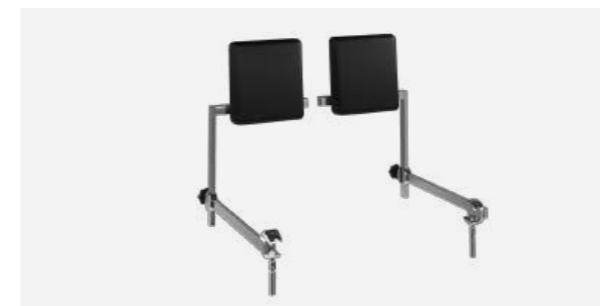

Bestellinformationen

EU: 514-100296  
USA: 514-100296

## Tibiastütze

### (ohne Klemme)

Die Tibiastütze dient zur Unterstützung des Knie- oder des Fußes eines Patienten während einer Knie- oder Beinoperation. Sie besteht aus Edelstahl und verfügt über ein antistatisches Polster. Der Polsterdurchmesser beträgt 13,5 cm, die Länge 27 cm.

**✓ Enthalten:**  
Metallstange, Polster.  
Die Klemme ist nicht im Lieferumfang enthalten.

**! Erforderlich:**  
Feste oder abnehmbare Seitenschiene mit 2 Klemmen  
+ eine separate Klemme (siehe Seite 19)

**+ Optional:**  
-



Bestellinformationen

EU: 514-100367-K  
USA: 514-100367-K

## Radialklemme



Bestellinformationen

EU: 514-100305  
USA: 514-100305-US

**✓ Enthalten:** Eine Edelstahl-klemme  
**! Erforderlich:** -  
**+ Optional:** Schienbein- oder Lateralstütze (Seiten 18, 22)

Eine robuste Klemme zur Befestigung von Zubehör wie der Tibiastütze.

## Radialklemme MIX



Bestellinformationen

EU: 514-100307  
USA: 514-100307-US

Eine robuste Klemme zur Befestigung von Zubehör. Einfache Seitenschienenbefestigung.

**✓ Enthalten:** Eine Edelstahl-klemme  
**! Erforderlich:** -  
**+ Optional:** Schienbein- oder Lateralstütze (Seiten 18, 22)

## Zubehörklemme



Bestellinformationen

EU: 514-100301  
USA: 514-100301-US

Eine einfache Klemme zur Befestigung von Zubehör wie der Tibiastütze.

**✓ Enthalten:** Eine Aluminium-klemme  
**! Erforderlich:** -  
**+ Optional:** Schienbein- oder Lateralstütze (Seiten 18, 22)

## STEUERGERÄT



### Zusätzlicher Schwenkgriff

Ermöglicht das Schwimmen der Tischplatte von verschiedenen Seiten. Fügt einen zweiten Schwenkgriff hinzu, der von einem Assistenten zusätzlich zum Standardschwenkgriff verwendet werden kann.


Bestellinformationen

EU: 555-1760  
USA: 555-1761

**Enthalten:**  
Ein kabelgebundener Schwenkgriff

**Erforderlich:**  
Feste oder abnehmbare Seitenschiene


**Optional:**  
-

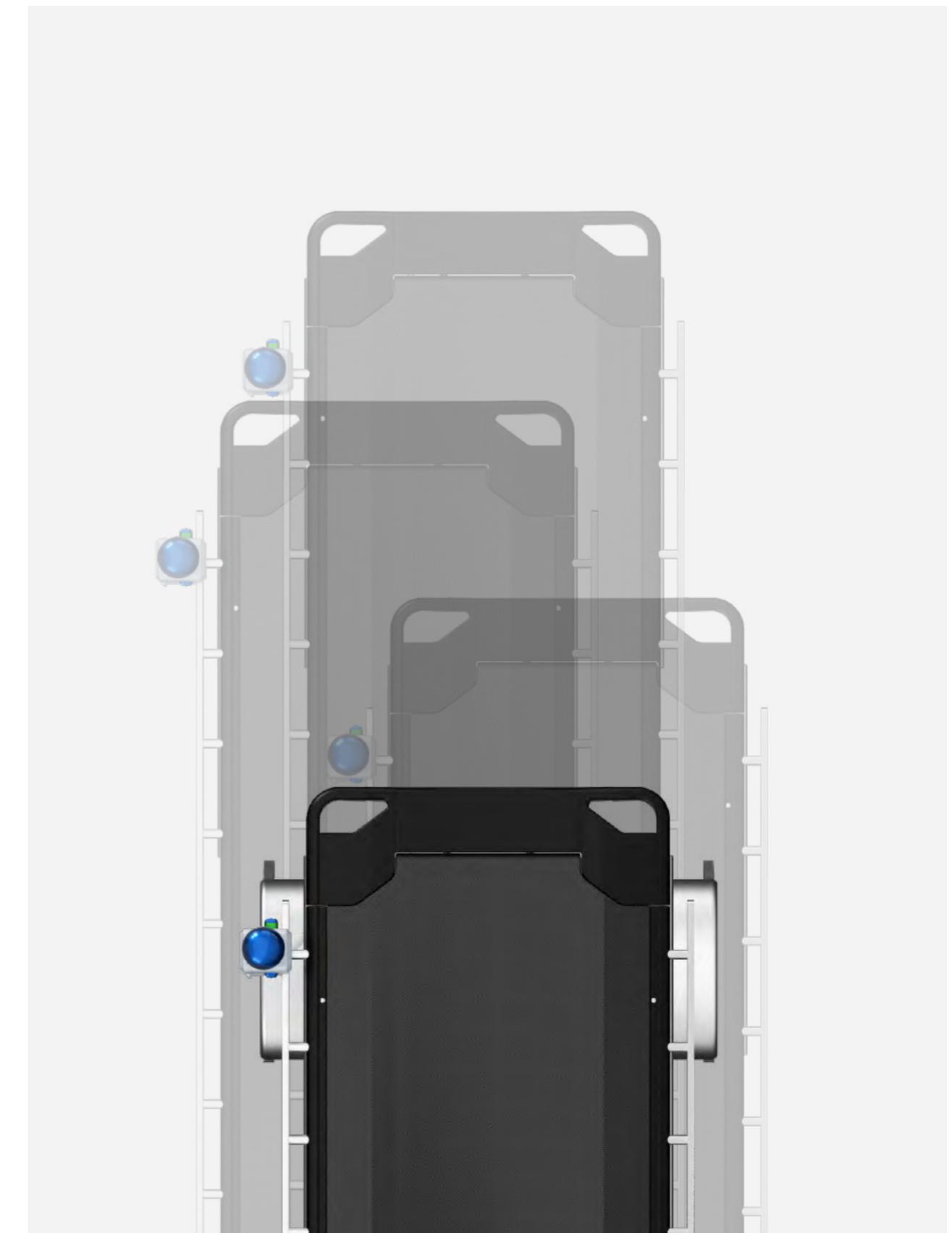

## ALLGEMEINE KÖRPERSTÜTZEN UND HALTERUNGEN

### Seitenstütze komplett mit Klemme

Die breite Stütze lässt sich je nach gewünschter Patientenposition in Höhe, Länge und Seite verstetzen. Abmessungen des gewölbten Polsters: 20 x 20 cm.

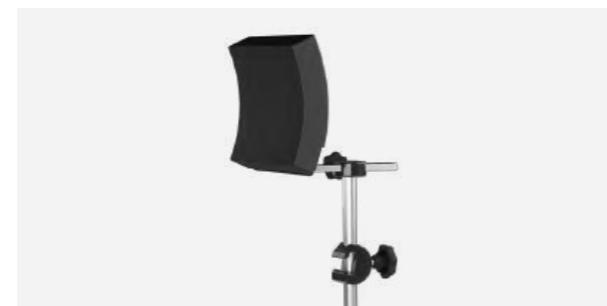

Bestellinformationen

EU: 514-50-3SR028  
USA: 514-50-3SR030

**Enthalten:**  
Metallstange, Klemme, gebogenes Polster

**Erforderlich:**  
Feste oder abnehmbare Seitenschiene mit 2 Klemmen

**Optional:**  
-

### Seitenstütze, verstellbar, ohne Klemme

Seitenstütze mit schmalen Polstern, einem flachen und einem gebogenen, zur Patientenlagerung auf dem Tisch. In verschiedenen horizontalen Winkeln drehbar. Die Länge der Stütze beträgt 35 cm, die Metallaufage des Polsters misst 17,5 x 7 cm.



Bestellinformationen

EU: 514-100560  
USA: 514-100560

**Enthalten:**  
Eine drehbare Auflage mit zwei Polstermodellen (einem flachen und einem gebogenen), keine Klemme

**Erforderlich:**  
Feste oder abnehmbare Seitenschiene mit 2 Klemmen + eine separate Klemme (siehe Seite 19)

**Optional:**  
-

### Seitenschutzgitter, klappbar, Paar

Seitenschutzgitter sind für die Unterstützung des Patienten vorgesehen. Sie gewährleisten insbesondere die Positionierung und den Komfort des Patienten während ERCP-Verfahren. Sie können leicht heruntergeklappt werden und verriegeln automatisch, wenn sie in die aufrechte Position geöffnet werden.



Bestellinformationen

EU: 514-100530  
USA: 514-100530-US

**Enthalten:**  
Zwei Seitenschutzgitter, 2 nicht abnehmbare Klemmen

**Erforderlich:**  
Feste oder abnehmbare Seitenschienen mit 2 Klemmen

**Optional:**  
Bezug für Seitenschutzgitter (ein Stück):  
**Nur EU:** 514-100530-H

### Beingurt (EU)



2,1 m lang x 8,5 cm breit, mit Klettverschluss zur Fixierung des Patienten.

Bestellinformationen

EU: 514-100465  
USA: Nicht verfügbar

### Deluxe-Maximum-Gurt (US)



Weich gepolstert, 60 cm lang x 15 cm breit, mit verstellbarem Gurt: 60 cm - 200 cm. Zur Sicherung des Patienten.

Bestellinformationen

EU: Nicht verfügbar  
USA: O-RSX2

**Enthalten:**  
Ein Patientengurt

**Erforderlich:**  
-

**Optional:**  
Seitenschienen oder Seitenschutzgitter (Seiten 10, 23)

**Enthalten:**  
Ein Patientengurt

**Erforderlich:**  
-

**Optional:**  
Seitenschienen oder Seitenschutzgitter (Seiten 10, 23)

## KOPFSTÜTZEN

### Verstellbare Kopfstütze

Vollständig strahlendurchlässige Kopfstütze, die die Tischplatte um 30 cm verlängert. Für eine einfache Intubation und eine optimale Karotisvisualisierung. Keine Seitenschienen erforderlich. Kann nur am freien Ende der Tischplatte befestigt werden. Nicht kompatibel mit 80,5 cm langen Seitenschienen.

- ✓ Enthalten:**  
Eine Kopfstütze mit Polster und zwei festen Klemmen
- ! Erforderlich:**  
-
- + Optional:**  
-



Bestellinformationen

EU: 535-1742  
USA: 535-1742

### 3D-Kopfstütze (Verlängerung)

Kopfstütze aus Carbonfaser, die die strahlendurchlässige Länge um 30 cm verlängert. Nützlich für 3D-Rotation, Angulation und Schrägaufnahmen. Nicht kompatibel mit festen oder abnehmbaren Seitenschienen mit 2 Klemmen ( $\geq 70,0$  cm).

- ✓ Enthalten:**  
Eine Kopfstütze mit Polster
- ! Erforderlich:**  
-
- + Optional:**  
-



Bestellinformationen

EU: 535-1745  
USA: 535-1745

### Feste Kopfstütze

Strahlendurchlässige, nicht verstellbare Kopfstütze, die die Tischlänge um 30 cm verlängert. Kann nur mit zwei abnehmbaren 80,5 cm langen Seitenschienen am freien Ende der Tischplatte befestigt werden.

- ✓ Enthalten:**  
Eine Kopfstütze mit Polster
- ! Erforderlich:**  
Zwei 80,5 cm lange abnehmbare Seitenschienen  
(siehe Seite 10)
- + Optional:**  
-



Bestellinformationen

EU: 535-1741  
USA: 535-1741



imagiQ3 Legacy Tisch mit 3D Kopfstütze/ Tischplattenverlängerung\*.

\* Produkte sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.  
Für weitere Informationen zur Marktverfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren STILLE-Vertreter.

## STRAHLENSCHUTZ

### Strahlenschutzvorhang

Strahlungsschutz mit Bleikautschuk (0,5 Pb), der vor Streustrahlung schützt. Befestigung an den Seitenschienen oder direkt auf der Tischplatte mit Klettband.



- ✓ Enthalten:**  
5 aneinander befestigte Strahlenschutzlampen

- ! Erforderlich:**  
-

- + Optional:**  
Feste oder abnehmbare Seitenschiene  
Strahlenschutzvorhang (blau)  
EU/USA: 535-1773



Bestellinformationen

**EU:** 535-1772 (graue Version)  
**USA:** 535-1772 (graue Version)

### Strahlenschutzset

Strahlungsschutz mit Bleikautschuk (0,5 Pb), der vor Streustrahlung schützt. Befestigung direkt auf der Tischplatte mit Klettband. Die Sets können auch ohne Seitenschienen benutzt werden.



- ✓ Enthalten:**  
2 Lamellen mit einem Ausschnitt für die Seitenschienenklemmen sowie 4 gerade Lamellen ohne Ausschnitt

- ! Erforderlich:**  
-

- + Optional:**  
Strahlenschutzset (blau)  
EU/USA: 535-1771



Bestellinformationen

**EU:** 535-1770 (graue Version)  
**USA:** 535-1770 (graue Version)



imagiQ3 Legacy Tisch mit zwei 80,5 cm langen Seitenschienen, einer verstellbaren Armauflage, einem Strahlenschutz-Set (blaue Version) und zwei Strahlenschutzvorhängen (blaue Version)\*.

\* Produkte sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Für weitere Informationen zur Marktverfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren STILLE-Vertreter.

## ERWEITERUNGEN FÜR CHIRURGISCHE TISCHE

### Katheterablage 1.000 mm (imagiQ3)

Eine Edelstahlplatte, die einen erweiterten Arbeitsbereich bietet. Die Plattenmaße betragen 1 m x 61,5 cm.

**Enthalten:**

Eine Ablage 1 m

**Erforderlich:**

Feste oder abnehmbare Seitenschienen mit 2 Klemmen

**Optional:**

-



Bestellinformationen

EU: 555-1750

USA: 555-1750

### Katheterablage 500 mm (imagiQ3)

Eine Edelstahlplatte, die eine erweiterte Arbeitsfläche bietet. Die Plattenmaße betragen 50 x 61,5 cm.

**Enthalten:**

Eine Ablage 50 cm

**Erforderlich:**

Feste oder abnehmbare Seitenschienen mit 2 Klemmen

**Optional:**

-



Bestellinformationen

EU: 555-1751

USA: 555-1751

### Instrumententablett mit Klemme

Verstellbares Tablett zum Ablegen von Instrumenten und anderen Geräten für das Operationsteam.

**Enthalten:**

Ein Instrumententablett mit Klemme

**Erforderlich:**

Feste oder abnehmbare Seitenschiene

**Optional:**

-



Bestellinformationen

EU: 514-50-3SR036

USA: 514-50-3SR037

### Verbreiterungselemente, 455mm Paar EU

Zwei 45,5 cm lange Teile. Erweitert die Liegefläche um 10,4 cm für ERCP oder Adipositaschirurgie.

**Enthalten:**

Zwei Verbreiterungselemente, Klemmen und Polster

**Erforderlich:**

Feste oder abnehmbare Seitenschiene(n) mit 2 Klemmen

**Optional:**

-



Bestellinformationen

EU: 514-100422

USA: Nicht verfügbar

# Index

Artikelnummer	Produktnamen	Seite	Artikelnummer	Produktnamen	Seite
O-RSX2	Deluxe-Maximum-Gurt (USA)	23	514-50-3SR032	Beinhalter mit Klemme EU (Paar)	17
512-5000	Armauflage Basic (USA)	15	514-50-3SR033	Beinhalter mit Klemme USA (Paar)	17
514-100296	Fußstützen (Paar)	18	514-50-3SR036	Instrumententablett mit Klemme (EU)	29
514-100301	Zubehörklemme, EU	19	514-50-3SR037	Instrumententablett mit Klemme USA	29
514-100301-US	Zubehörklemme, USA	19	535-1720	Abnehmbare Seitenschiene USA (80,5 cm; ein Stück)	10
514-100305	Radialklemme (EU)	19	535-1721	Abnehmbare Seitenschiene DIN (EU, 80,5 cm, ein Stück)	10
514-100305-US	Radialklemme, USA	19	535-1723	Seitenschiene USA (70,0 cm, ein Stück)	10
514-100307	Radialklemme MIX (EU)	19	535-1724	Kurze Seitenschiene US (28,5 cm, ein Stück)	11
514-100307-US	Radialklemme MIX, USA	19	535-1725	Kurze Seitenschiene DIN (EU, 28,5 cm, ein Stück)	11
514-100311	Anästhesiebogen (EU)	12	535-1729	Seitenschiene EU (70,0 cm, ein Stück)	10
514-100311-US	Anästhesiebogen, USA	12	535-1730	Strahlendurchlässige Armauflage	14
514-100367-K	Tibiastütze (ohne Klemme)	18	535-1741	Feste Kopfstütze	24
514-100401	Infusionsstange (EU)	12	535-1742	Verstellbare Kopfstütze	24
514-100401-US	Infusionsstange, USA	12	535-1745	3D-Kopfstütze (Verlängerung)	25
514-100422	Verbreiterungselemente, 455 cm Paar EU	29	555-1750	Katheterablage 1.000 mm (imagiQ3)	28
514-100465	Beingurt (EU)	23	555-1751	Katheterablage 500 mm (imagiQ3)	28
514-100530	Seitenschutzgitter, klappbar/ Paar EU	23	535-1770	Strahlenschutzset grau	26
514-100530-H	Bezug für Seitenschutzgitter, ein Stück (EU)	23	535-1771	Strahlenschutzset blau	26
514-100530-US	Seitenschutzgitter, klappbar/ Paar USA	23	535-1772	Strahlenschutzvorhang grau	26
514-100552	Arm- und Beinhalter, gebogen	16	535-1773	Strahlenschutzvorhang blau	26
514-100553	Bezug für Arm- und Beinhalter, gebogen	16	555-1760	Zusätzlicher Schwenkgriff (EU)	20
514-100554	Arm- und Beinhalter, gerade	16	555-1761	Zusätzlicher Schwenkgriff (USA)	20
514-100555	Bezug für Arm- und Beinhalter, gerade	16	555-1790	imagiQ3 Basispaket Gefäßchirurgie (USA)	08
514-100560	Seitenstütze, verstellbar ohne Klemme	22	555-1791	imagiQ3 Premiumpaket Gefäßchirurgie (USA)	08
514-50-3SR025	Verstellbare Armauflage DIN (EU)	14	555-1793	imagiQ3 Basis Zubehörpaket (USA)	09
514-50-3SR027	Verstellbare Armauflage USA	14			
514-50-3SR028	Seitenstütze komplett mit Klemme EU	22			
514-50-3SR030	Seitenstütze komplett mit Klemme USA	22			

# STILLE – Surgical perfection. For life.

STILLE ist mit über 180 Jahren Erfahrung eines der ältesten Medizintechnikunternehmen der Welt. Bei STILLE entwickeln, produzieren und verkaufen wir chirurgische Instrumente und Operationstische an Ärzte weltweit.

## Operationstische

Wir bieten Spezialtische für minimalinvasive Verfahren an, deren Preis, Sicherheit und Funktionen für den stationären und ambulanten Bereich optimiert sind.

Die mobilen Operationstische von STILLE Medstone tragen zur Effizienzsteigerung im Operationssaal bei und stellen gleichzeitig preisgünstige Lösungen mit Qualität und Zuverlässigkeit dar.

Der Bildgebungstisch STILLE imagiQ3™ mit seinen Niedrigdosisfunktionen ist für moderne mobile Hybrid-OP-Umgebungen sowie periphere und interventionelle Verfahren optimiert.

## Chirurgische Instrumente

Wir bieten ein umfassendes Angebot an handgefertigten, geschmiedeten Instrumenten für alle Bereiche der offenen Chirurgie, mit besonderem Schwerpunkt auf Herz-Kreislauf-Chirurgie, rekonstruktiver und ästhetischer plastischer Chirurgie.

Unsere Instrumente zeichnen sich durch filigranes Design, branchenführende Haltbarkeit und eine einzigartige Haptik aus, wodurch STILLE bei Chirurgen auf der ganzen Welt zu einem bekannten und hoch angesehenen Lieferanten geworden ist.

Weitere Informationen finden Sie unter  
[www.stille.se](http://www.stille.se)

## STILLE AB

Ekbacken 11  
SE-644 30 Torshälla  
Schweden  
📞 +46 8 588 580 00  
✉️ sales@stille.se  
🌐 www.stille.se

## STILLE Surgical Inc.

840 Parkview Blvd  
Lombard, IL 60148  
USA  
📞 1.800.665.1614  
✉️ sales.us@stille.se  
🌐 www.stille.se/us



Diese Produkte sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich. Weitere Informationen zur Marktverfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem STILLE-Vertreter. Dieses Dokument beschreibt die Geräte zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Produktänderungen entnehmen Sie bitte immer dem Benutzerhandbuch. Dieses Dokument wurde aus dem Englischen übersetzt. Im Falle von Unstimmigkeiten ist die englische Version maßgebend. Die gezeigten Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts. Die in diesem Dokument beschriebenen Abmessungen können bei Winkeln mit einer Toleranz von  $\pm 2,0^\circ$  und bei Längen mit  $\pm 1,25$  cm abweichen.

